

Ormco™
Your Practice. Our Priority.

symetri™
シンメトリークリア CLEAR

優れた強度 | 進化した審美性 | 容易なディボンディング





進化した審美ブラケット、シンメトリークリア

シンメトリークリアは優れた強度と患者さんの快適性、そして安全で簡単なディボ
ンディングを可能にした進化した審美ブラケットです。

進化した多結晶
アルミナセラミック
製造技術により
優れた審美性と
高い信頼性を実現。

丸みを帯びたなめらかな
表面処理で不快感を軽減。
平面よりも光の拡散で高い
審美性。

面取りされた近遠心のエッジにより
ノッチングを減少しスライディング
しやすい。

複合湾曲を持つ解剖
学的なベースで、様々
な歯面に適合。

しっかり把持、位置決めする
ためのベースフランジ。

十分なトルクと
アンダータイイングエリア、
ウイングの強度により、
ダメージや破折なくSS
のリガチャーワイヤーで
容易に二重結紮*。

優れたディボンディングを是非体験してください

シンメトリークリアの独自のベースデザインと特許取得済みの専用のプライヤーにより、安全で簡単にブラケットを破折することなくディボンディングできます。最小限の力でブラケットを一塊でディボンディングすることができます。*



ベース面は最小限の力でブラケットを破損することなく、一塊でディボンディングできるように設計されています。**




オームコ特許のパドの表面に施されたレーザーエッチングパターンによりボンディングの信頼性が向上しています。

複合湾曲のベースを持つパドはそれぞれの歯の表面にフィットするように解剖学的に設計されています。

患者様、先生方に向けてデザインされました

シンメトリークリアは、臨床的要求を満たす機能を備えた患者の快適さのために設計された審美性の高いブラケットです。滑らかな表面とロープロファイルは上下顎のボンディングを可能にして、咬合干渉を最小限に抑えるように設計されています。

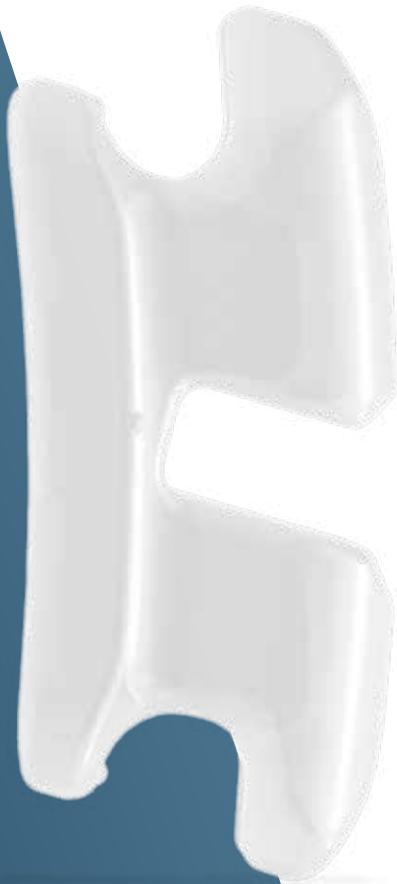


- ワイヤー挿入が容易な面取りされたスロット
- 丸みを帯びたスロットエッジにより、ノッチングが最小限に抑えられ、ワイヤーの滑りがスムーズです
- タイウイングの丸みを帯びた輪郭と形状で表面はよりなめらかで患者さんの快適性を高めます
- ロープロファイルブラケットのため、装着したブラケットがエナメル質に接触する可能性がより低くなっています
- ロープロファイルにより高い審美性とより少ない咬合干渉を実現しました



独自に最適化されたイン/アウト寸法

シンメトリークリアはスタンダード、スリムイン・アウトの両方を上顎に使用できます。

Ormcoの独自のスリムイン・アウトディメンションは、
中切歯、側切歯、犬歯の切縁を正確に揃えるように設計されています。
それによりワイヤーバンドを減らし、治療結果を改善します*。

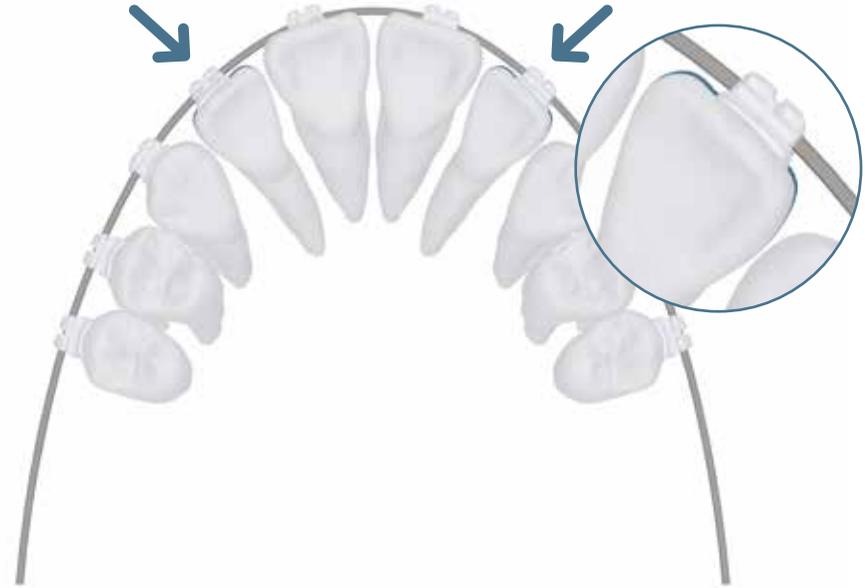

**コンピューターシミュレーションによる社内データ。




symetri™
シンメトリークリア CLEAR

部位	トルク	アンギュレーション	ローテーション	ブラケットタイプ	商品番号 (販売単位5個)			
上顎					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
中切歯	+17°	4°	0°	ツイン	418-1111	418-1110	419-1111	419-1110
側切歯	+10°	8°	0°	ツイン	418-1211	418-1210	419-1211	419-1210
側切歯 - スリムイン・アウトオプション	+10°	8°	0°	ツイン	418-1213	418-1212	419-1213	419-1212
犬歯	0°	8°	0°	ツイン	418-1311	418-1310	419-1311	419-1310
犬歯-フック付き	0°	8°	0°	ツイン	418-2311	418-2310	419-2311	419-2310
小白歯	-7°	0°	0°	ツイン	418-1510		419-1510	
小白歯-フック付き	-7°	0°	0°	ツイン	418-2511	418-2510	419-2511	419-2510
下顎					.018 L	.018 R	.022 L	.022 R
前歯	-6°	0°	0°	ツイン	418-1010		419-1010	
犬歯	0°	3°	2°	ツイン	418-1411	418-1410	419-1411	419-1410
犬歯-フック付き	0°	3°	2°	ツイン	418-2411	418-2410	419-2411	419-2410
第1小白歯	-12°	0°	0°	ツイン	418-1610		419-1610	
第1小白歯-フック付き	-12°	2°	0°	ツイン	418-2611	418-2610	419-2611	419-2610
第2小白歯	-17°	0°	0°	ツイン	418-1710		419-1710	
第2小白歯-フック付き	-17°	2°	0°	ツイン	418-2711	418-2710	419-2711	419-2710

1 症例キット				.018	.022
シンメトリークリア	上顎/下顎 5-5	3-4-5番フック付き	ツイン	746-2101	746-2201
シンメトリークリア	上顎/下顎 3-3	3番フック付き	ツイン	746-2102	746-2202
シンメトリークリア	上顎 3-3	3番フック付き	ツイン	746-2103	746-2203
シンメトリークリア	上顎 5-5	3番フック付き	ツイン	746-2105	746-2205
シンメトリークリア	上顎 5-5	3-4-5番フック付き	ツイン	746-2106	746-2206

シンメトリークリア ディボンディングプライヤー 866-4025

シンメトリークリア タイポドント 717-0021

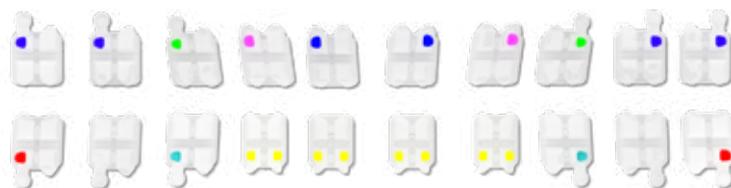

symetri™

シンメトリークリア CLEAR

Ormco™
Your Practice. Our Priority.

オームコジャパン カボデンタルシステムズ株式会社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー15F TEL 03-6859-0065 www.kavo.jp

OOYHVF1906-rev1
SY-102

■販売名:シンメトリー クリア 認証番号:230ADBZX00074000 管理医療機器 歯列矯正用アタッチメント ■販売名:シンメトリー クリア ディボンディング プライヤー 届出番号:27B1X00149205500 一般医療機器 歯科矯正用プライヤー