


## ● PolyLUX II (光重合器) のお手入れ

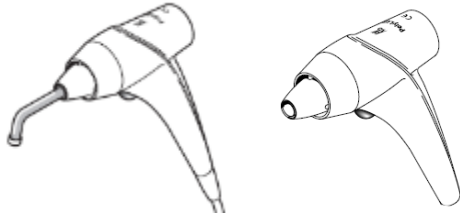

\* PolyLUX II (光重合器)の販売は終了しております。

・PolyLUX II 表面をワイプで消毒を行います。

・先端のファイバー部を本体から取り外し、ファイバーと本体差し込み部分もワイプで消毒を行います。

・PolyLUX IIは、滅菌できません。

## ● SATLEC mini LED (光重合器) のお手入れ



・Mini LEDの 表面をワイプで消毒を行います。

・先端のファイバー部を本体から取り外し、ファイバーとリングもワイプで消毒を行います。

・SATLEC mini LEDは、滅菌できません。