

**KaVo ミニチュアヘッドタービンに  
キッズエディションが新登場**  
お子さまにも優しい  
静音でより快適な治療  
パワー 12%\* アップ

**NEW**

(\* 当社従来品比)



**KaVo マスタートルクミニ LUX M8700LK キッズエディション**

**サックバック 0.000001 bar 以下**

**新採用 ダイレクトストップテクノロジー**

お子さまの患者さんの口腔内でもアクセスしやすく、  
操作性に優れています。



キッズエディションにはタービンに加えて以下のグッズがパッケージになっています。


ブックレット (英語版)



ステッカー



ポスター

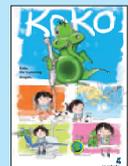

# KaVo マスタートルクミニ LUX M8700 L

ミニチュアヘッドにより安全で優れたアクセス性を実現

## 優れた可視性

- ヘッド高さ 12.1mm
- ヘッド角 100°/グリップ角 19°の組み合わせ (KaVo 特許)  
臼歯部へのアクセスが容易
- 視野角度 22°
- ショートシャンクバーからロングシャンクバー  
(16mm ~ 21mm) まで使用可能

## パワー

- パワー 19W (当社従来品比 12% アップ)
- 安定した効率的な切削

## ダイレクトストップテクノロジー (DST)

- 約 1 秒でバーの回転が停止  
安全性と衛生性の向上

## サックバック 0.000001 bar 以下

- 汚染物質の吸引防止
- 衛生性の向上、長い製品寿命

## 静音性

- 騒音レベル 59dB (A)
- サイレンステクノロジー  
不快なタービン音を抑えた低騒音
- 静かな停止音

## 他社カプリング対応モデル

- M8700LS (シロナカプリング用)

## スペシャルデザイン

- M8700LK (キッズエディション)



## 使いやすさを実現

- プラズマコーティング  
グローブ装着時の滑りにくいグリップ感
- 交換可能な水フィルター  
良好なスプレー水の供給

## 証明された KaVo クオリティ

- 優れたチャック保持力 (最大 32N)  
安全性の向上と長い製品寿命
- タングステンカーバイドガイドブッシュ  
芯ぶれを抑え、長い製品寿命
- KaVo 独自のセラミックボールベアリング
- 24 カ月保証
-  ドイツ製 (Made in Germany)

## KaVo master series

製品番号	製品名	
3.001.0000	マスタートルクミニ LUX M8700L	KaVo マルチフレックスカプリング用
1.011.2330	マスタートルクミニ LUX M8700LK キッズ エディション	KaVo マルチフレックスカプリング用 Koko デザイン
3.001.0600	マスタートルクミニ LUX M8700LS	シロナカプリング用

販売名: マスタートルク 一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース 管理医療機器・特定保守管理医療機器 認証番号: 225A1BZX00056000



KaVo. Dental Excellence.

## カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481  
大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451  
札幌支店 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ・ 仙台支店 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376  
名古屋支店 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ・ 福岡支店 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>  
VICPJB1508V2 INS-058