

CAD/CAM時代の デジタルオペレーティング スタンダードプリコーション対応ユニット

エステチカE50 コンパクトチェア 新発売

ドイツKaVoが日本仕様として開発したお子様とご高齢者にも優しく快適なコンパクトチェア



コンパクトチェアの特長

- エルゴノミクスに基づいたチェア設計
- チェア最高位760mm 最低位450mm
- 省スペース設計
- 高齢者でも安全で楽に乗り降り可能なノンステップ
- 垂直に座ることができ、正面からの診査・診断が可能
- 腰への圧迫や無理な引き伸ばしを軽減する背板



ハイパフォーマンスコンパクトチェア

デジタルオペレーティング

治療中に同じ手順を繰り返し行う場合は、MEMOdent (メモリー) 機能によりハンドピースごとに保存されているパラメータを即座に呼び出すことができ、マルチフットコントローラの操作と連動したデジタルオペレーティングが可能です。エア回路、モーター回路共にハンドピースの回転数やスプレー状態が自在に設定できます。形成やエンドの各治療ステップに応じ必要なハンドピースの回転数を呼び出すことができ、集中して精度の高い治療が効率的に行えます。




MEMOdent機能により、ハンドピースごとに保存されているパラメータを簡単に手早く呼び出すことができます。(最大6ユーザー×3段階プログラミング)



KaVo スマートドライブテクノロジー

100回転からフルトルク
低速でも安定した回転力とスムーズな立ち上がり

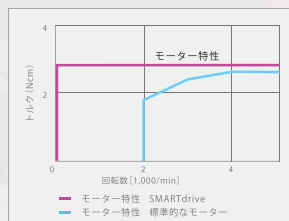

SMARTdrive
高いトルクと無振動で起動する低振動性。
100~40,000 rpmの広い回転域が
治療に大きなメリットをもたらします。

KaVo 水消毒システム

きれいな水

過酸化水素水を使用した「常時水消毒システム」と「集中水消毒システム」の2つの水消毒システムにより水路管内を衛生的に保ちます。



KaVo ESTETICA® E50 コンパクトチェア

- 多彩なメモリー機能によるデジタルオペレーティング
- 低速からフルトルクが得られるスマートドライブテクノロジー
- 小型・軽量ブラシレスモーター イントラLUX KLモーター703LED
- 常時水消毒システム、集中水消毒システム搭載可能
- ハンズフリーを実現するマルチフットコントローラ (オプションでコードレス可)

販売名: エステチカ E50
販売タイプ: コンパクトチェア テーブルタイプ(TM.C.) スイングアームタイプ(S.C.)
一般的名称: 歯科用ユニット
認証番号: 223AIBZX00015000
管理医療機器 特定保守管理医療機器



KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌営業所 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ・ 仙台営業所 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
名古屋営業所 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ・ 福岡営業所 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844
<http://www.kavo.jp>

VECPBF1409V2 EQU-046