




ハイパワー・高精度 45°ヘッドによる優れたアクセス性



NEW KaVo サージトルク LUX S459L 45°ヘッド スタンダードタービン (25mm サージカルバー専用)


KaVo サージトルク LUX S459L は、ハイパワー 19W の切削力によりスピーディーな形成を可能します。ヘッド部の側面から排気エアーを排出することにより、皮下気腫などのリスクを減少させ、患者さんの安全性を高めます。ウォータージェットは、サージカルバー 25mm の先端を効果的に冷却します。特殊な 45°のヘッド角度で広い視野を確保し、臼歯部へのアクセス性も高まります。通常のタービンではアクセスが困難な智歯や埋伏歯の外科治療等に最適です。

-  ハイパワー&高精度
-  特殊なヘッド角度（45°）の採用
-  アクセス性の向上





KaVo サージトルク LUX S459L

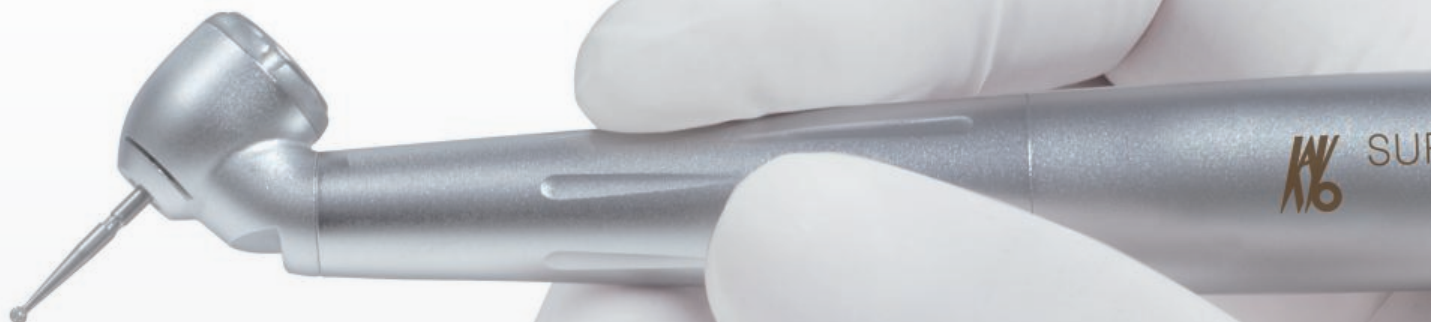

ハイパワー 高精度

ハイパワー・高精度

信頼性の高い性能、優れた耐久性

- ハイパワー 19W（駆動圧力 2.8bar 時）
- KaVo 独自のセラミックボールベアリングにより、長い製品寿命と低騒音
- 芯ブレを抑え、精度の高い切削を実現するタングステンカーバイドガイドブッシュ
- ドイツ製（Made in Germany）
- 保証期間：12 カ月間

45° ヘッド

特殊な 45°ヘッド角度の採用

人間工学に基づいた設計で優れた操作性と使いやすさ

- 45°ヘッドにより、臼歯部へのアクセスも容易
- KaVo マルチフレックス LUX カプリングに接続
- 優れた視界が得られるライト付き
- 軽量、人間工学に基づいた形状により、長時間の治療にも最適

安全性 衛生性

- 切削部位を避けて排気することで、エアによる切削部位への感染を阻止
- 凹部のない表面設計により、清掃が簡単で衛生的
- 4層コーティング加工が施された表面（1,000回の滅菌耐久性テスト済み）
- 最高 30N のチャック保持力。強力で安全なチャックシステムにより、長いバーも完璧に保持
- ウォータージェットにより、サージカルバー 25mm の先端を効果的に冷却（ミストジェットではありません。）
- 1 ホールスプレー

製品番号	製品名	
3.000.4808	サージトルク LUX S459 L	ヘッド角度 45°、ハイパワー 19W、側面に 2カ所の排気孔、セラミックボールベアリング、1ホールスプレー、25mm サージカルバー専用、KaVo マルチフレックス LUX カプリングに接続

販売名：サージトルク 一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース 管理医療機器・特定保守管理医療機器 認証番号：227AIBZX00025000



KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
 大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
 札幌支店 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ・ 仙台支店 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
 名古屋支店 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ・ 福岡支店 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>
 VICPJB1512V2 INS-068