

KaVo *Expert Series*

新発売 KaVo タービン 他社接続タイプ

今お使いのユニットに
KaVoのハンドピースが
使えるようになりました。



E680L シリーズ (スタンダードヘッド)

モリタ カプリング用
(α カプリング)



エキスパートトルク E680LM
製品番号: 1.006.4300

ヘッド角度100°/グリップ角度19°/18ワットのパワー/ガラスロッドライト付き/プッシュボタンチェックシステム/セラミックボールベアリング/4ホール冷却スプレー/交換可能なスプレー水フィルター/熱消毒可能/135℃までのオートクレーブ滅菌可能/ヘッド径:12.5mm/ヘッド高さ:13.5mm/標準価格:128,000円

NSK® カプリング用



エキスパートトルク E680LN
製品番号: 1.006.4700

Sirona® カプリング用



エキスパートトルク E680LS
製品番号: 1.006.4600

E677L シリーズ (ミニヘッド)

モリタ カプリング用
(α カプリング)



エキスパートトルク ミニ E677LM
製品番号: 1.006.3800

ミニヘッド/ヘッド角度100°/グリップ角度19°/ガラスロッドライト付き/プッシュボタンチェックシステム/セラミックボールベアリング/3ホール冷却スプレー/交換可能なスプレー水フィルター/熱消毒可能/135℃までのオートクレーブ滅菌可能/ヘッド径:10.8mm/ヘッド高さ:12.2mm/標準価格:135,000円

NSK® カプリング用



エキスパートトルク ミニ E677LN
製品番号: 1.006.0100

納得の



ヶ月保証



KaVo. Dental Excellence.

高品質でコストパフォーマンスに優れた KaVo エキスパートトルク

納得の
18ヶ月保証

KaVo エキスパートシリーズは、優れた耐久性で長期間に亘って高品質でご使用いただける、コストパフォーマンスが極めて高い製品です。また、日々の治療が効率よく行えるようにパフォーマンスが高く、低ストレスでメンテナンスが簡単にできるように、独自の設計と技術が採用されています。




1. 経済的で優れた耐久性

> 長期の製品寿命 - 厳格な品質基準に沿った製造工程、製造公差の厳しい基準順守、ダストフリー環境での組み立て、摩耗しにくい部品素材の採用により、長期間安心してご利用いただけます。

> 18ヶ月の保証期間。ステンレススチールヘッド、セラミックベアリングなど、高品質で耐久性の高い素材や部品の採用、サックパックを防ぐ構造により高品質を実現しています。



耐久性が高く、高トルクで安定回転する精密なベアリング

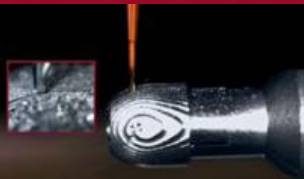

耐衝撃性に優れた素材でヘッド部のハウジングを守ります。

3. 信頼できる高品質基準

> 良好な注水を得るための4ホールまたは3ホール冷却スプレーの構造、最高30Nの強い保持力を持つチャックシステムなど、KaVoは高い性能基準を採用しています。(4ホール冷却スプレー: E680Lシリーズ、3ホール冷却スプレー: E677Lシリーズ)

> KaVoガラスロッドは反復滅菌でも透過性を衰退させず、治療エリアを25,000LUXで照らします。



死角を作らない優れた注水スプレー



ブレのない回転が長期にわたってえられる30Nの強力なチャック保持力

2. 高い治療効率

> 高い出力レベルにより、効率的な形成ができます。

> KaVoのエキスパートグリップの表面には凹凸が少なく、滑らかな形状をしています。手にフィットし、衛生面でも最適な形状です。

> ヘッドの小型化により視界が広がり、治療エリアへのアクセスが簡単です。



臼歯部へのアクセスが容易なKaVo特許角度



水づまりを防ぐ交換可能なスプレー水フィルター

- ・ご使用のユニットにより、エアー圧、スプレー圧などの調整が必要になる場合があります。出力値はご使用のユニットによって異なり、ユニットによっては規定のトルクがえられない場合があります。
- ・メンテナンスは専用のKaVoスプレーをご使用ください。
- ・135℃以上の乾燥器や薬液を使用した洗浄器はご使用になれません。

一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース 販売名: エキスパートトルク 認証番号: 223AIBZX00038000 管理医療機器、特定保守管理医療機器



KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ●〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481

大阪本社 ●〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451

札幌営業所 ●Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ・仙台営業所 ●Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376

名古屋営業所 ●Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ・福岡営業所 ●Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

VICPTC1405V2 INS-028