

カー製品

セメント関連製品 キャンペーン

Kerr
RESTORATIVES

キャンペーン期間:2017年2月21日(火)~4月20日(木)

ご好評のセメント関連製品を期間限定の特別価格でご提供させていただきます。
この機会に是非、お試しください。

掲載価格は全て標準価格です。

キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせ願います。

セルフアドヒーズ型レジンセメント

マックスセム エリート クロマ



ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用。余剰セメント除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、時間や温度状況を気にする必要がなく、セメンティングの不安やストレスから解放されます。

カラーインジケーターチャート



濃い
ピンク色

↑
補綴物セット
スタート

薄い
ピンク色

ごく僅かな
ピンク色

ピンク色
消失

ゲル化開始
余剰セメント除去
約2分経過

完全硬化
約4分経過

■ マックスセム エリート クロマ リフィル

クリアー ホワイト イエロー

セット内容

シリンジ 5g 2本
ミキシングチップ付

標準価格

13,600円

品目コード:クリアー 36300 ホワイト 36301 イエロー 36302

■ マックスセム エリート クロマ クリアー 4本パック

クリアー

セット内容

シリンジ クリアー 5g 4本
ミキシングチップ付

標準価格

18,000円

品目コード:36299

キャンペーン期間限定のお得なセット

■ マックスセム エリート クロマ 8本パック

クリアー ホワイト イエロー

セット内容

マックスセム エリート
クロマ リフィル ×4
同色8本セット

標準価格

28,000円

+

■ ミキシングチップ Aタイプ レギュラー ピンク 50本

標準価格

6,000円

➔

キャンペーンセット
標準価格

28,000円

伝票記載コード:クリアー 0.808.2567 ホワイト 0.808.2568 イエロー 0.808.2569

品目コード:36303

プライマー併用型レジンセメント エヌ・エックス・スリー



■ エヌ・エックス・スリー XTR スターターキット

セット内容

デュアルキュアシリンジ 5g クリアー 1本
ミキシングチップ付
オブチボンドXTR プライマー 5ml 1本
オブチボンドXTR アドヒーシブ 5ml 1本
アプリケーターチップ、分取皿付

標準価格
19,000円

品目コード: 35617

オールセラミックス、ラミネートベニアをはじめ、あらゆる補綴物のセットに高い接着力を発揮し、余剰セメントの除去性能にも優れたユニバーサルタイプのレジンセメントです。



■ デュアルキュアシリンジ

クリアー ホワイト イエロー プリーチ ホワイトオパール

セット内容

シリンジ 5g 1本
ミキシングチップ付

標準価格
8,300円

品目コード: クリアー 33643 ホワイト 33644 イエロー 33645 プリーチ 33646 ホワイトオパール 33647

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号: 224ADBZX00285000

2ステップボンディングシステム オブチボンド XTR



直接法、間接法に対応する2ステップの光重合型ボンディングシステムです。
エヌ・エックス・スリーとの組み合わせは、高い接着力を発揮します。

■ オブチボンド XTR ボトルキット

セット内容

プライマー 5ml 1本
アドヒーシブ 5ml 1本
アプリケーターチップ、分取皿付

標準価格
15,000円

品目コード: 35106

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器認証番号: 224ADBZX00289000

レジンセメントの具備すべき操作性と エヌ・エックス・スリーの特徴



東京医科歯科大学
部分床義歯補綴学分野
風間 龍之輔 先生

歯冠修復に欠かせないレジンセメントは、除去性能も十分検討する必要がある。セメントの残渣が残ったままでは、歯肉炎や二次う蝕などの原因となる。歯冠色であるため残渣の確認は容易ではなく、高い接着力故に除去が困難となることが少なくない。

除去性能に関わるポイントとして、「セメントの流動性」と「除去に適した硬化度とその操作時間」の2点に留意すべきである。流動性については、気泡の混入などが起こらず、被着面以外の領域に不要に流出しないことが重要となる。複雑な部位に流出した場合、残渣の確認も除去も困難となる。また、除去に適した硬化度を維持できない製品が散見される。

適切な流動性と硬化度は好みや経験で分かれるが、最も流動性と硬化度のコントロールが容易と思える製品がエヌ・エックス・スリーである。特筆すべきは、装着時に溢する余剰セメントがその性状を留めたまま不要に流出しないことである。重合に関しても除去に適した硬化度に容易に到達し、操作時間には十分なゆとりを感じる。

オブチボンド XTRを併用することで、あらゆる歯冠色材料から金属まで被着体を問わず高い接着力が報告されており、高い耐摩耗性は長期に機能させる上で高い信頼性を有するシステムであるといえる。

カーのセメントは、様々な症例に合わせて使い分けが可能です。

推奨使い分けチャート

(弊社セメンティングシステム テクニカルガイドより)

臨床用途及び材質別

◎最適 ○適 ×不適

| | セメントの種類 | マックスエリート クロマ | エヌエックススリー | ネクサス RMGIセメント |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 臨床用途 | CAD/CAM(セラミック、レジン) | ○ | ◎ | × |
| | クラウン、ブリッジ、インレー、アンレー | ◎ | ◎ | ◎ |
| | ベニア | × | ◎ | × |
| | インプラント(クラウン) | ○ | ○ | × |
| | ポスト | ◎ | ◎ | ○ |
| | 接着ブリッジ | ○ | ◎ | × |
| 材質 | 金属 | ◎ | ◎ | ◎ |
| | ハイブリッド | ◎ | ◎ | × |
| | ジルコニア | ◎ | ◎ | ○ |
| | ニケイ酸リチウムガラスセラミックス | ◎ | ◎ | × |
| | レジン | ◎ | ◎ | ○ |
| オールセラミックス | ○ | ◎ | × | |

レジン強化型ガラスイonomerセメント ネクサス RMGIセメント



常に安定した物性をご提供するオートミックスタイプ。タックキュアによるOne-Peel™クリーンアップと高い接着強度を実現しました。また、持続的なフッ素徐放性を発揮します。

■ ネクサス RMGIセメント キット 3本入

セット内容
シリンジ 5g 3本
ミキシングチップ付

標準価格
6,000円

品目コード: 35640

管理医療機器 歯科合着用ガラスポリアルケノート系レジンセメント 医療機器認証番号: 226ADBZX00016000

テンポラリーセメント テンプボンド・テンプボンド NE



■ テンプボンド チューブ

セット内容
ベース 50g
アクセレーター 15g
練和紙 1冊

標準価格
2,800円

品目コード: 00370

管理医療機器 歯科用酸化亜鉛ユー-ジノールセメント 医療機器認証番号: 224ADBZX00265000



■ テンプボンド NE チューブ

セット内容
ベース 50g
アクセレーター 15g
練和紙 1冊

標準価格
2,800円

品目コード: 21370

管理医療機器 歯科用酸化亜鉛非ユー-ジノールセメント 医療機器認証番号: 224ADBZX00266000

テンポラリーセメント除去ポイント オブチクリーン



歯面や歯肉を傷めずテンポラリーセメントを簡単に除去、清掃します。作業部はシリコン製で40μmの酸化アルミナ粒子が含まれ、研磨ペーストは不要です。



■ オブチクリーン 12本入

標準価格
5,600円

品目コード: 950

一般医療機器 歯科用研削器材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039100400

樹脂製開口器

オブチビュー



スタンダード



スモール



使用例

ご使用の目安

スタンダード:成人男女
スモール:小学校高学年以上、口腔の小さい成人男女
※実際のご使用は患者さんの口腔に合わせて選択願います。

柔軟性に優れた樹脂製の開口器です。口唇を優しく押さえ、安定した開口状態を保ちます。接着操作、CR充填、PMTC、写真撮影と多目的にご使用いただけます。

オートクレーブ可能 134℃ 3分

■ オブチビュー アソートパック

セット内容

スタンダード、スモール 各2人

標準価格

14,200円

品目コード: 5500A

一般医療機器 歯科用開口器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039100500

■ オブチビュー 2人

スタンダード スモール

標準価格

8,800円


品目コード: スタンダード 5500 スモール 5502

一般医療機器 歯科用開口器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039100500

フッ素非含有PMTCペースト

クリニークチューブ フッ素無し

フッ素非含有のPMTCペーストで、接着操作前の歯面清掃に適しています。

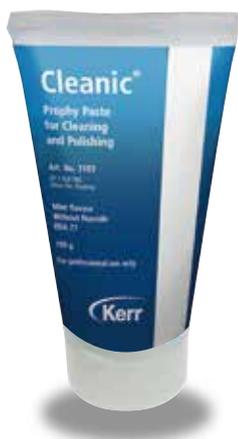

■ クリニークチューブ フッ素無し

フレーバー:ペパーミント 100g入

標準価格

3,900円

品目コード: 3183

一般医療機器 歯面研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039103600

歯科用エッチング材

ゲルエッチャント

塗布領域が見やすいパープルカラー採用。適度な粘着性があり、塗布時に流れたり分離することはありません。

リン酸: 37.5%含有/エッチング時間: 15秒



■ ゲルエッチャント

セット内容

3g×3本入

標準価格

7,000円

品目コード: 31297

管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号: 224ADBZX00284000

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

Kerr

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F

カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273

http://www.kavo.jp