

審美修復サポートキャンペーン

キャンペーン期間／2018年4月23日(月)～6月20日(水)

ご好評の審美修復サポート製品を期間限定の**特別価格**でご提供させていただきます。
この機会にぜひ、お試しください。

NEW
充填 **ハーモナイズ**

ナノハイブリッド コンポジットレジン
保険診療でも患者さんに
喜ばれる修復を



接着 **マックスセム
エリートクロマ**

セルフアドヒーシブ型レジンセメント
余剰セメント除去を視覚で確認



防湿 **オブチダム
フィックス ア フロス
ソフトクランプ**

ラバーダムシステム
CR充填や接着操作に適した
口腔内環境を提供



審査
診断 **オブチビュー**

樹脂製開口器
優しい装着感、患者さんの疲労軽減



研磨 **オブチワンステップ
ポリッシャー**

CR用ワンステップシリコンポイント
中研磨から艶出しまでこれ1本で効率化



研磨 **ポーセレン/
セラミック ポリッシャー**

ポーセレン・セラミック用シリコンポイント
ガラスセラミックの審美的回復



研磨 **ジルカット
ダイヤモンドバー**

ジルコニア用ダイヤモンドバー
ジルコニアなどの高強度補綴物に



研磨 **ジルカット
ポリッシャー**

ジルコニア用ポリッシャー
2ステップで研磨時間短縮



掲載価格は全て標準価格です。
キャンペーン価格につきましては、
お取り引き歯科材料店様に
お問い合わせ願います。

充填

保険診療でも患者さんに喜ばれる修復を

ハーモナイズ / ナノハイブリッド コンポジットレジン

NEW



保険適用



口腔内でよく馴染むカメレオン効果は、残存歯質、隣在歯と調和します。前歯部の修復に適した器具離れの良さと賦形性に優れています。

ハーモナイズを用いた前歯部の保険症例

中切歯および、側切歯のⅢ級窩洞修復

中切歯のⅣ級窩洞修復



写真提供: 静岡県 石川歯科 鷺野 崇 先生

ハーモナイズ

| 品目コード | 品名 | 内容 | 標準価格 |
|-------|-----------------|---|---------|
| 36631 | ハーモナイズ トライアルキット | 2gシリンジ × 4本 エナメル:A2、A3 デンチン:A3、A3.5 | 5,600円 |
| 36635 | ハーモナイズ アドバンスキット | 4gシリンジ × 8本 エナメル:A2、A3 デンチン:A2、A3、A4 インサイザル トランスルーセント:アンバー、クリア、グレー | 22,400円 |

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号: 229ADBZX00052000

研磨

中研磨から艶出しまでこれ1本で効率化

オブチワンステップ ポリッシャー / CR用ワンステップシリコンポイント

オブチワンステップ ポリッシャー

様々なポイントやブラシを使い分ける必要が無く、1本で中研磨から艶出しまで行えます。オートクレーブ対応 134℃ 3分



ハーモナイズのエナメルA3を充填後、オブチワンステップポリッシャーによる研磨



写真提供: 東京都 世田谷区 タカハシデンタルオフィス 高橋 登 先生

セット内容 フレーム、カップ、ディスク 各2本入

| 品目コード | 品名 | 標準価格 |
|-------|----------------------------|--------|
| 8004 | オブチワンステップ ポリッシャー アソートミニキット | 3,500円 |

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039104400

接着

余剰セメント除去を視覚で確認

マックスセム エリート クロマ/セルフアドヒーシブ型レジンセメント

ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用。余剰セメント除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、時間や温度状況を気にする必要がなく、セメンティングの不安やストレスから解放されます。

マックスセム エリート クロマ リフィル

クリアー ホワイト イエロー

セット内容 シリンジ 5g 2本、ミキシングチップ付

| 品目コード | シェード | 標準価格 |
|-------|------|---------|
| 36300 | クリアー | 13,600円 |
| 36301 | ホワイト | |
| 36302 | イエロー | |

マックスセム エリート クロマ クリアー 4本パック

クリアー

セット内容 シリンジ クリアー 5g 4本、ミキシングチップ付

| 品目コード | シェード | 標準価格 |
|-------|------|---------|
| 36299 | クリアー | 18,000円 |

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号: 228ADBZX00053000




CR充填や接着操作に適した口腔内環境を提供


オブチダム・フィックス ア フロス・ソフトクランプ/ラバーダムシステム

ラバーダムの必要性は認識されていますが、操作に慣れを要し、敬遠されがちでした。オブチダムは口腔に合わせた無理のない形状により、歯牙に掛かるテンションは弱く、装着が容易に行えます。また、テンプレートやラバーダムパンチも不要です。


ソフトクランプ、フィックスアフロスを併せてご使用いただくと、より効率よく装着が行えます。

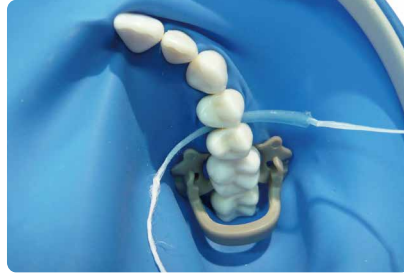

白歯用

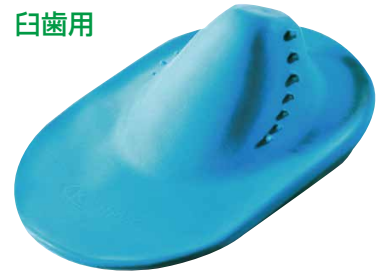

前歯用

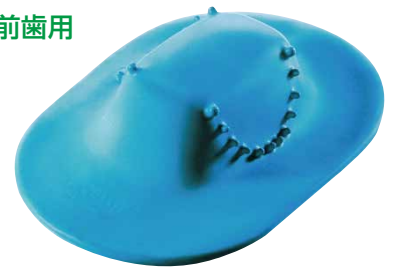

■ オブチダム

| 品目コード | 品名 | 標準価格 |
|-------|-----------------------------|--------|
| 5200 | オブチダム白歯用 イントロキット 10枚、フレーム1本 | 4,900円 |
| 5203 | オブチダム前歯用 イントロキット 10枚、フレーム1本 | 4,900円 |

一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039100600

■ フィックス ア フロス

金属製のクランプを用いる事無く、ラバーダム固定が行えます。



| 品目コード | 品名 | 標準価格 |
|-------|--------------------|--------|
| 5260 | フィックス ア フロス 1巻20回分 | 3,000円 |

一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039103800

■ ソフトクランプ

樹脂製で様々な歯冠にフィットし、サイズ別のクランプを揃える必要はありません。



| 品目コード | 品名 | 標準価格 |
|-------|-------------|--------|
| 5250 | ソフトクランプ 5個入 | 7,500円 |

一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039103700



優しい装着感、患者さんの疲労軽減

オブチビュー/樹脂製開口器

光学印象や口腔内撮影、ホワイトニング、ブラケット装着と幅広い応用が可能。

従来の開口器に比べ、樹脂製の優しい装着感。オートクレーブが可能で、経済的です。

オートクレーブ可能 134℃ 3分

ご使用の
目安

スタンダード: 成人男女
スモール: 小学校高学年以上、口腔の小さい成人男女
※実際のご使用は患者さんの口腔に合わせて選択願います。



スタンダード



スモール

■ オブチビュー

| 品目コード | 品名 | 標準価格 |
|-------|-----------------------------------|---------|
| 5500A | オブチビュー アソートパック スタンダード、スモール 各2入 | 14,200円 |

| 品目コード | 品名 | 標準価格 |
|--------------------------|-----------|--------|
| スタンダード 5500 スモール 5502 | オブチビュー 2入 | 8,800円 |

一般医療機器 歯科用開口器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039100500



ジルコニアなどの高強度補綴物に

ジルカット ダイヤモンドバー・ジルカット ポリッシャー / ジルコニア用研磨システム

ダイヤモンド粒子を細かく均一化、研削時の抵抗を減らし、能力低下となる粒子の脱落を防ぎ、高耐久性を発揮します。咬合調整時も深い切削痕が残らず、削り過ぎを抑えます。また、細かいダイヤモンド粒子は振動や発熱を抑え、マイクロクラックの発生を抑制します。ポリッシャーは2ステップで効率よく研磨傷を取り除き、研磨時間を短縮します。初期導入に適したセットを3種類、ご用意しました。

■ ダイヤモンドバー セット

ジルコニア補綴物の除去、咬合調整に対応したダイヤモンドバーのベーシックセット



専用バースタンド付

セット内容



ダイヤモンドバー

■ ポリッシャー セット

プレポリッシング、ハイシャインの全形態セット



専用バースタンド付

セット内容



プレポリッシング(中研磨) ハイシャイン(艶出し)

■ ポリッシャー ダイヤモンドバー セット

ポリッシャーとダイヤモンドバーを組み合わせたジルコニア研磨のトータルセット



専用バースタンド付

セット内容



ポリッシャー ダイヤモンドバー

| 品目コード | タイプ | 品名 | 入数 | 標準価格 | 使用回転数 |
|---------|-------|---------------------------|----|--------|---|
| LS-7556 | FG | ジルカット ダイヤモンドバー セット | 4 | 6,600円 | 300,000 回転 / 分以下 |
| LS-517 | CA | ジルカット ポリッシャー セット | 6 | 8,100円 | 7,000-10,000 回転 / 分 |
| LS-7579 | CA,FG | ジルカット ポリッシャー ダイヤモンドバー セット | 5 | 7,500円 | ポリッシャー：7,000-10,000 回転 / 分 ダイヤモンドバー：300,000 回転 / 分以下 |

一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー 医療機器製造販売届出番号：27B1X00039111800 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 医療機器製造販売届出番号：27B1X00039111900



ガラスセラミックスの審美的回復

ポーセレン/セラミック ポリッシャー / ポーセレン・セラミック用シリコンポイント

CAD/CAMで広く用いられる長石系セラミックやリユーサイト強化型セラミックに対し、研磨ペーストを用いる事なく十分な光沢が得られます。

■ ポーセレン/セラミック ポリッシャー

| 荒研磨 | | 中研磨 | | 艶出し | |
|---|--|---|--|---|--|
| プレポリッシャー 色調：グリーン CAタイプ  | | グロスポリッシャー 色調：グレー CAタイプ  | | ハイグロスポリッシャー 色調：ピンク CAタイプ  | |
| 品目コード | 形態 | 品目コード | 形態 | 品目コード | 形態 |
| ID7071/12 |  フレーム | ID7171/12 |  フレーム | ID7271/12 |  フレーム |
| ID7081/12 |  カップ | ID7181/12 |  カップ | ID7281/12 |  カップ |
| ID7091/12 |  ミニポイント | | | ID7291/12 |  ミニポイント |
| 12本入り 各 5,000円 | | 12本入り 各 5,000円 | | 12本入り 各 5,000円 | |

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 医療機器製造販売届出番号：27B1X00039111000

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。



カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社
〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273
<http://www.kavo.jp>

KKSAJB1804V1 KR-0185