

カー製品

Kerr
RESTORATIVES

審美修復オータムキャンペーン

キャンペーン期間／2018年8月21日(火)～10月19日(金)

ご好評の審美修復サポート製品を期間限定の**特別価格**でご提供させていただきます。
この機会にぜひ、お試しください。

充填

ハーモナイズ

NEW

ナノハイブリッドコンボジットレジン

保険診療でも患者さんに
喜ばれる修復を



研磨

オプチワンステップ
ポリッシャー

CR用ワンステップシリコンポイント
中研磨から艶出しまでこれ1本で効率化



防湿

オプチダム
フィックス ア フロス
ソフトクランプ

ラバーダムシステム
CR充填や接着操作に適した
口腔内環境を提供



オプチビュー

審査
診断

樹脂製開口器

優しい装着感、患者さんの疲労軽減



接着

マックスセム
エリートクロマ

セルフアドヒーシブ型レジンセメント
余剰セメント除去を視覚で確認



研磨

ポーセレン/
セラミック ポリッシャー

ポーセレン・セラミック用シリコンポイント
ガラスセラミックスの審美的回復



研磨

ジルカット
ダイヤモンドバー

ジルコニア用ダイヤモンドバー
ジルコニアなどの高強度補綴物に



研磨

ジルカット
ポリッシャー

ジルコニア用ポリッシャー
2ステップで研磨時間短縮



掲載価格は全て標準価格です。
キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせ願います。



色が合う

保険
適用

口腔内でよく馴染むカメレオン効果は、残存歯質、隣在歯と調和します。前歯部の修復に適した器具離れの良さと賦形性に優れています。



ハーモナイズの使い方、臨床レポートをチェック



ハーモナイズを用いた前歯部の保険症例
中切歯および、側切歯のⅢ級窩洞修復



中切歯のⅣ級窩洞修復



写真提供:静岡県 石川歯科 鷺野 崇 先生

ハーモナイズ

品目コード	品名	内容	標準価格
36631	ハーモナイズ トライアルキット	2gシリンジ × 4本 エナメル:A2、A3 デンチン:A3、A3.5	5,600円
36635	ハーモナイズ アドバンスキット	4gシリンジ × 8本 エナメル:A2、A3 デンチン:A2、A3、A4 インサイザル トランスルーセント:アンバー、クリア、グレー	22,400円

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号: 229ADBZX00052000

中研磨から艶出しまでこれ1本で効率化

オブチワンステップ ポリッシャー / CR用ワンステップシリコンポイント

オブチワンステップ ポリッシャー

様々なポイントやブラシを使い分ける必要が無く、1本で中研磨から艶出しまで行えます。オートクレーブ対応134℃ 3分



ハーモナイズのエナメルA3を充填後、オブチワンステップポリッシャーによる研磨



写真提供:東京都 世田谷区 タカハシデンタルオフィス 高橋 登 先生

セット内容 フレーム、カップ、ディスク 各2本入

品目コード	品名	標準価格
8004	オブチワンステップ ポリッシャー アソートミニキット	3,500円

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039104400



オブチワンステップ ポリッシャーの使い方、臨床レポートをチェック



ガラスセラミックスの審美的回復

ポーセレン/セラミック ポリッシャー / ポーセレン・セラミック用シリコンポイント

CAD/CAMで広く用いられる長石系セラミックやリューサイト強化型セラミックに対し、研磨ペーストを用いることなく十分な光沢が得られます。

ポーセレン/セラミック ポリッシャー



ポーセレン/セラミック ポリッシャーの使い方、臨床レポートをチェック



荒研磨		中研磨		艶出し	
プレポリッシャー 色調: グリーン CAタイプ		グロスポリッシャー 色調: グレー CAタイプ		ハイグロスポリッシャー 色調: ピンク CAタイプ	
品目コード	形態	品目コード	形態	品目コード	形態
ID7071/12	フレーム	ID7171/12	フレーム	ID7271/12	フレーム
ID7081/12	カップ	ID7181/12	カップ	ID7281/12	カップ
ID7091/12	ミニポイント			ID7291/12	ミニポイント
12本入り 各 5,000円		12本入り 各 5,000円		12本入り 各 5,000円	

写真提供:神奈川県 小池歯科医院 小池 軍平 先生

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039111000

接着

余剰セメント除去を視覚で確認

マックスセム エリート クロマ/セルフアドヒーシブ型レジンセメント



濃い
ピンク色

薄い
ピンク色

ごく僅かな
ピンク色

ピンク色
消失

↑
補綴物セット
スタート

ゲル化開始
余剰セメント除去
約2分経過
光重合の場合は
2cm離して1〜2秒照射

完全硬化
約4分経過

※時間は使用条件により若干異なります。
写真提供: 神奈川県 小池歯科医院 小池 軍平 先生

ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用。余剰セメント除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、時間や温度状況を気にする必要がなく、セメンティングの不安やストレスから解放されます。

■ マックスセム エリート クロマ リフィル

クリアー ホワイト イエロー
セット内容 シリンジ 5g 2本、ミキシングチップ付

品目コード	シェード	標準価格
36300	クリアー	13,600 円
36301	ホワイト	
36302	イエロー	

■ マックスセム エリート クロマ クリアー 4本パック

クリアー
セット内容 シリンジ クリアー 5g 4本、ミキシングチップ付

品目コード	シェード	標準価格
36299	クリアー	18,000 円

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号: 228ADBZX00053000


防湿

CR充填や接着操作に適した口腔内環境を提供

オブチダム・フィックス アフロス・ソフトクランプ/ラバーダムシステム


ラバーダムの必要性は認識されていますが、操作に慣れを要し、敬遠されがちでした。オブチダムは口腔に合わせた無理のない形状により、歯牙に掛かるテンションは弱く、装着が容易に行えます。また、テンプレートやラバーダムパンチも不要です。ソフトクランプ、フィックスアフロスを併せてご使用いただくと、より効率よく装着が行えます。

CHECK! オブチダムの
使い方、臨床レポートをチェック

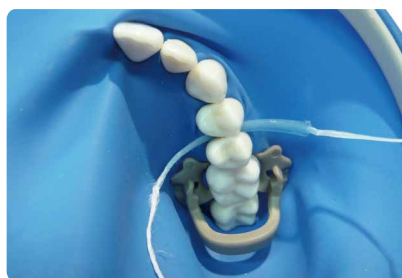

臼歯用

前歯用

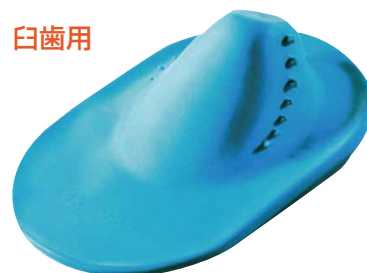

■ オブチダム

品目コード	品名	標準価格
5200	オブチダム臼歯用 イントロキット 10枚、フレーム1本	4,900 円
5203	オブチダム前歯用 イントロキット 10枚、フレーム1本	4,900 円

一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039100600

■ フィックス アフロス

金属製のクランプを用いる事無く、ラバーダム固定が行えます。



品目コード	品名	標準価格
5260	フィックス アフロス 1巻20回分	3,000 円

一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039103800

■ ソフトクランプ

樹脂製で様々な歯冠にフィットし、サイズ別のクランプを揃える必要はありません。



品目コード	品名	標準価格
5250	ソフトクランプ 5個入	7,500 円

一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039103700

光学印象や口腔内撮影、ホワイトニング、ブラケット装着と幅広い応用が可能。

従来の開口器に比べ、樹脂製の優しい装着感。オートクレーブが可能で、経済的です。 オートクレーブ可能 134℃ 3分

ご使用の
目安

スタンダード:成人男女
スモール:小学校高学年以上、口腔の小さい成人男女
※実際のご使用は患者さんの口腔に合わせて選択願います。



スタンダード




スモール



オブチビューの
使い方、臨床レポートをチェック



柔軟な樹脂製で簡単装着

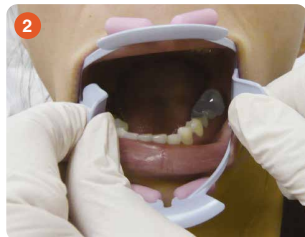

オブチビュー

品目コード	品名	標準価格
5500A	オブチビュー アソートパック スタンダード、スモール 各2入	14,200円

品目コード	品名	標準価格
スタンダード 5500 スモール 5502	オブチビュー 2入	8,800円

一般医療機器 歯科用開口器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039100500

ジルコニアなどの高強度補綴物に

ジルカット ダイヤモンドバー・ジルカット ポリッシャー / ジルコニア用研磨システム

ダイヤモンド粒子を細かく均一化、研削時の抵抗を減らし、能力低下となる粒子の脱落を防ぎ、高耐久性を発揮します。咬合調整時も深い切削痕が残らず、削り過ぎを抑えます。また、細かいダイヤモンド粒子は振動や発熱を抑え、マイクロクラックの発生を抑制します。ポリッシャーは2ステップで効率よく研磨傷を取り除き、研磨時間を短縮します。初期導入に適したセットを3種類、ご用意しました。



ジルカットの
使い方、臨床レポートをチェック



ダイヤモンドバー セット

ジルコニア補綴物の除去、咬合調整に対応したダイヤモンドバーのベーシックセット



専用バースタンド付

セット内容



ダイヤモンドバー

ポリッシャー セット

プレポリッシング、ハイシャインの全形態セット



専用バースタンド付

セット内容



ポイント カップ ディスク
プレポリッシング(中研磨) ハイシャイン(艶出し)

ポリッシャー ダイヤモンドバー セット

ポリッシャーとダイヤモンドバーを組み合わせたジルコニア研磨のトータルセット



専用バースタンド付

セット内容



プレポリッシング カップ ハイシャイン カップ
ポリッシャー ダイヤモンドバー

品目コード	タイプ	品名	入数	標準価格	使用回転数
LS-7556	FG	ジルカット ダイヤモンドバー セット	4	6,600円	300,000 回転 / 分以下
LS-517	CA	ジルカット ポリッシャー セット	6	8,100円	7,000-10,000 回転 / 分
LS-7579	CA,FG	ジルカット ポリッシャー ダイヤモンドバー セット	5	7,500円	ポリッシャー: 7,000-10,000 回転 / 分 ダイヤモンドバー: 300,000 回転 / 分以下

一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039111800 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00039111900

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。



カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社
〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273
<http://www.kavo.jp>

KKSAJB1808V1-KR-0191