

KaVo PMTCキャンペーン

～すべては笑顔のために～

KaVoのPMTC関連製品はスケーリング、歯面清掃(エアポリッシング)、ポリッシングに至るまで、より迅速で簡単かつ効率的な予防治療を可能にし、術者と患者さんの笑顔を実現します。
キャンペーン期間中、対象製品を特別価格にてご提供いたします。



KaVo
World of smile

————— キャンペーン期間 —————

2022年7月21日(木)～11月18日(金)のご注文分まで

患者さんにやさしい

効率的

より迅速な処置

衛生的

2022 KaVo PMTCキャンペーン オーダーシート	
キャンペーン期間 / 2022年7月21日(木)～11月18日(金)のご注文分まで	
貴医院名(必ずご記入ください)	ご注文先 Tel.
お取引先ディーラー名	ご担当

	製品番号	製品名	標準価格(税抜き)	ご注文数	
エアースケーラー	1.007.1604	ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック	325,000		
	1.005.9310	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LX クイック	294,000		
	1.007.1606	ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック	266,000		
	1.005.9311	ソニックフレックス エアースケーラー 2008X クイック	235,000		
	1.007.1605	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LS クイック	325,000		
	1.007.0540	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LXS クイック	294,000		
	1.000.8333	ソニックフレックス エアースケーラー 2003L	316,000		
	1.000.4243	ソニックフレックス エアースケーラー 2003LX	285,000		
	1.000.8334	ソニックフレックス エアースケーラー 2003	257,000		
	1.000.4246	ソニックフレックス エアースケーラー 2003X	225,000		
	1.006.6871	ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM	198,000		
エアースケーラー用チップ	2008用	1.005.8949	ソニックフレックス チップ No.5A スケーリング ユニバーサル	13,000	
		1.005.8950	ソニックフレックス チップ No.6A スケーリング シックル	13,000	
		1.005.8951	ソニックフレックス チップ No.7A スケーリング ペリオ	13,000	
		1.006.1953	ソニックフレックス チップ No.8A スケーリング ペリオロング	13,000	
		1.006.1982	ソニックフレックス チップ No.48A クリーンブラシホルダー	21,000	
		1.006.1934	ソニックフレックス チップ No.60A パロ	19,000	
		1.006.1935	ソニックフレックス チップ No.61A パロ	19,000	
		1.006.1936	ソニックフレックス チップ No.62A パロ	19,000	
		2003用	0.571.5171	ソニックフレックス チップ No.5 スケーリング ユニバーサル	13,000
			0.571.5181	ソニックフレックス チップ No.6 スケーリング シックル	13,000
	0.571.5191		ソニックフレックス チップ No.7 スケーリング ペリオ	13,000	
	0.571.5371		ソニックフレックス チップ No.8 スケーリング ペリオロング	13,000	
	0.571.0401		ソニックフレックス チップ No.48 クリーンブラシホルダー	21,000	
	0.571.7402		ソニックフレックス チップ No.60 パロ	19,000	
	0.571.7412		ソニックフレックス チップ No.61 パロ	19,000	
	0.571.7422		ソニックフレックス チップ No.62 パロ	19,000	
	共通	0.571.0402	ソニックフレックス フラット型ブラシ 小 No.1 (5個入)	3,300	
		0.571.0412	ソニックフレックス フラット型ブラシ 大 No.2 (5個入)	3,300	
0.571.0422		ソニックフレックス コニカル型ブラシ 小 No.3 (5個入)	3,300		
0.571.0432		ソニックフレックス コニカル型ブラシ 大 No.4 (5個入)	3,300		
0.571.0472		ソニックフレックス スパイラル型ブラシ 小 No.5 (5個入)	3,300		
0.571.0482		ソニックフレックス スパイラル型ブラシ 大 No.6 (5個入)	3,300		
歯面清掃用器具	3.002.8000	プロフィーフレックス 4 ウェーブ	190,000		
	3.002.8200	プロフィーフレックス 4 ライム	190,000		
	3.002.8800	プロフィーフレックス 4 フラミンゴ	190,000		
	3.004.5900	プロフィーフレックス 4S ウェーブ	190,000		
	3.004.5930	プロフィーフレックス 4S ライム	190,000		
	3.004.5950	プロフィーフレックス 4S フラミンゴ	190,000		
歯面研磨剤	1.013.4400	プロフィーパール セレクション スティックタイプ (15g×80袋)	21,000		
	1.010.1826	プロフィーパール ニュートラル スティックタイプ	21,000		
	1.010.1828	プロフィーパール ミント スティックタイプ	21,000		
	1.010.1829	プロフィーパール ピーチ スティックタイプ	21,000		
	1.010.1830	プロフィーパール オレンジ スティックタイプ	21,000		
	1.010.1831	プロフィーパール カシス スティックタイプ	21,000		
	1.007.0014	プロフィーフレックス パウダー オレンジ	19,000		
	1.007.0015	プロフィーフレックス パウダー ベリー	19,000		
	1.007.0016	プロフィーフレックス パウダー チェリー	19,000		
	1.007.0017	プロフィーフレックス パウダー ミント	19,000		
	ポリッシング用コントラングル	1.009.3610	マスターマティック LUX M07L	140,000	
1.008.1824		イントラヘッド L31 プロフィー	48,000		
1.008.4998		エキスパートマティック E31 C	135,000		
1.011.6760		スマートマティック プロフィー S31	59,000		
1.011.6800		スマートマティック プロフィー S33	51,000		

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、お取引先ディーラー様までお問い合わせください。



マスターマティック LUX・イントラヘッド
 エキスパートマティック
 スマートマティック

ソニックフレックス エアースケーラー

プロフィーフレックス 4



カボ デンタルシステムズ ジャパン合同会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35
 TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481
 お問い合わせ先 TEL.0800-888-7480 (フリーコール)
<https://www.kavo.jp>





KaVo ソニックフレックス エアスケラー

頑固な歯石も簡単に除去

パワフルさと静音設計を兼ね備えたKaVo ソニックフレックス エアスケラーは、頑固な歯石を徹底的にしかも優しく除去します。

ソニックフレックス エアスケラー 2008L クイック

- 軽くひねるだけでチップを素早く簡単に交換
- 3段階のレベル調節(120μm・160μm・240μm)
- 運動方向: ループ状
- プラズマコーティング
- グラスロッドライト(2008L/2008LSシリーズ)
- チップ No.5A/6A/7A付き(2008/2008L/2008LSのみ)
- オートクレープ滅菌可能(135℃まで)
- 24カ月保証



ソニックフレックス チップ スケーリング

- 効率的でいたわりのある歯石除去
- 浅い歯周ポケットの清掃

No.5 ユニバーサル



No.7 ペリオ



No.6 シックル



No.8 ペリオロング



クリーン

- 歯肉にやさしい清掃とポリッシング
- 適用範囲が広く使用が容易

No.48



- フラット型ブラシ 小/大
- コニカル型ブラシ 小/大
- スパイラル型ブラシ 小/大

パロ

- 深さ9mmまでの深い歯周ポケットを優しく効果的にクリーニング

No.60



No.61



No.62



ストレート

左湾曲

右湾曲

ソニックフレックス エアスケラー 2003L

- 3段階のレベル調節(120μm・160μm・240μm)
- 運動方向: ループ状
- プラズマコーティング
- グラスロッドライト(2003L/2003LXのみ)
- チップ No.5/6/7付き(2003/2003Lのみ)
- オートクレープ滅菌可能(135℃まで)
- 18カ月保証



ソニックフレックス エアスケラー 2004LM

モリタ用

藤森 直子 先生 日米歯科衛生士

No.5 ユニバーサル 使用

大まかな歯石をソニックフレックスエアスケラーで優しく効果的に落としていきます。優しいタッチで痛みの少ないソニックフレックス エアスケラーの使用が患者さまの満足度を上げています。

販売名: ソニックフレックス エアスケラー 2008 クイック
販売名: ソニックフレックス エアスケラー 2003
販売名: ソニックフレックス エアスケラー 2004LM

一般的名称: 歯科用エアスケラー
一般的名称: 歯科用エアスケラー
一般的名称: 歯科用エアスケラー

認証番号: 224AIBZX00059000
認証番号: 21500BZY00311000
認証番号: 219AIBZX000100A01

管理医療機器・特定保守管理医療機器
管理医療機器・特定保守管理医療機器
管理医療機器・特定保守管理医療機器



KaVo ポリッシング用ハンドピース

スムーズな回転による優しいポリッシング

KaVoポリッシング用ハンドピースは、健康な歯を維持するために優しくかつ効果的な処置を実現します。

• 経済的で優れた操作性

スマートマティック プロフィー S31

- 減速比 8:1
- スナップオン/スクリューインタイプ
- 360°回転
- ライトなし
- 注水なし
- 12ヶ月保証



KaVo smart series

スマートマティック プロフィー S33

- 減速比 8:1
- スナップオンタイプ
- 70°の反動運動
- ライトなし
- 注水なし
- 12ヶ月保証



• 効率の良い処置が可能

エキスパートマティック E31C

- 減速比 5.4:1
- スナップオン/スクリューインタイプ
- 360°回転
- ライトなし
- 注水付き
- ペーストを使用した後に水でしっかりペーストを落とし、洗い流しながら仕上げが可能
- 研磨剤の侵入を防ぐヘッドの特殊構造
- 手にフィットしやすいエキスパートグリップ
- 18ヶ月保証

KaVo expert series



• ヘッド交換だけでポリッシング用ハンドピースに

イントラヘッド L31 プロフィー(ヘッド)


マスターマティック LUX M07L(シャンク)

- 減速比 2.7:1(シャンク)、2:1(ヘッド)
- スナップオン/スクリューインタイプ
- 360°回転
- ライト付き
- 注水付き
- 研磨剤の侵入を防ぐマルチシール
- 優れたグリップ感と衛生性のプラズマコーティング
- 24ヶ月保証

KaVo master series



ヘッド内部へのペーストの侵入を防ぐVシーリング

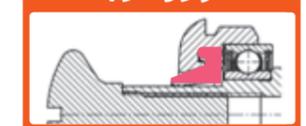

白歯部へのアクセスもスムーズ



画像提供: 小池歯科医院 吉久保典子先生

販売名: マスターマティック
販売名: イントラヘッド
販売名: エキスパートマティック
販売名: スマートマティック

一般的名称: ストレート・ギアードコントラアングル
一般的名称: ストレート・ギアードコントラアングル
一般的名称: ストレート・ギアードコントラアングル
一般的名称: ストレート・ギアードコントラアングル

認証番号: 227AIBZX00026000
認証番号: 224AIBZX00068000
認証番号: 223AIBZX00039000
認証番号: 229AIBZX00035000

管理医療機器・特定保守管理医療機器
管理医療機器・特定保守管理医療機器
管理医療機器・特定保守管理医療機器
管理医療機器・特定保守管理医療機器



KaVo プロフィーフレックス 4

簡単で効率的なクリーニング

KaVoプロフィーフレックス 4は、歯肉縁上および歯肉縁下のクリーニングに対応するオールラウンダーな歯面清掃器です。患者さんや術者の負担を軽減し、快適なクリーニングを提供します。

ひとりひとりに合わせて

長さの異なる2種類のグリップスリーブから手にフィットするものをお選びいただけます。ハンドピースをクリニック内で共有する際にも便利です。



パウダー量3段階調節

レベル1はパウダー噴霧がなく、ハンドピース内の残留したパウダーを除去します。レベル2および3では、患者さんや症例に応じてクリーニングパワーを調節します。



効果的なクリーニング

焦点エリアが小さく、正確にパウダーを噴霧させることで、パウダーの飛散を抑えます。また、ノズルが細いため、歯肉縁上のクリーニング時にも視野を確保できます。



ペリオチップ(オプション品)

歯肉縁下(ポケット内)のクリーニング、ブリッジやインプラント周辺、クラウンのクリーニングが可能です。



KaVo プロフィーフレックス 4

KaVo シロナ用

- 先端のノズルを交換するだけで、歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニングが可能
- 水とパウダーの混合噴霧システム採用パウダーの飛散を防止、歯面にやさしいクリーニング
- 3色のカラフルなハンドピースボディ(フラミンゴ・ウェーブ・ライム)



クリーニング前 クリーニング後

KaVo プロフィーパール

歯面に優しいクリーニング

- 主成分: 炭酸カルシウム(粒子径60~70μm)
- 一定したサイズの球形粒子で、効率よくやさしいクリーニング
- 着色やバイオフィルムを効果的に除去
- 各15g×80袋



KaVo プロフィーフレックスパウダー

スピーディーかつ効率的なクリーニング

- 主成分: 炭酸カルシウム(粒子径60~70μm)
- 一定したサイズの球形粒子で、効率よくやさしいクリーニング
- 着色やバイオフィルムを効果的に除去
- 各15g×80袋

