

高価だがECO

KaVoトリートメントユニットは他のメーカーと比べ高価であるものの、コストパフォーマンスに優れていると思います。操作性、安定性、耐久性、清掃性すべてを兼ね備え、チーム全体のパフォーマンス向上と時間短縮ができるからです。診療中の機器トラブルは患者さんをお待たせするだけでなく、チーム全体のストレスになります。良いものを提供し、患者さんの生活の質向上に寄与するには、まずは我々が良い道具を使い、より良い作業環境を整える必要があると思っています。今は診療所レベルでもSGDsへの取り組みを行う時代です。日々の手入れのしやすさや環境への配慮など、みんなに優しく良質なものを長く使いたいものです。あらゆる面でKaVoトリートメントユニットは価格以上の価値があると思っています。歯科医師人生最後まで伴走してもらうつもりです。

Customer Information



きばやし歯科医院

京都府長岡京市開田1丁目21-21
TEL 075-954-9600



院長 木林 博之

1992年 大阪大学 歯学部 卒業
1997年 きばやし歯科医院 開設

大阪大学大学院 歯学研究科臨床教授
北海道大学病院 客員臨床教授
日本補綴歯科学会 専門医・指導医
日本歯科審美学会 認定医
日本臨床歯周病学会 認定医
日本口腔インプラント学会 専門医

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。
※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。

KAVO
Dental Excellence

カボ デンタルシステムズ ジャパン合同会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー
TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481
お問合せ先 TEL.0800-100-6505 (フリーコール)
<https://www.kavo.jp>

VECPJB2304V1 EQU-112



25年間の信頼のKaVo

きばやし歯科医院

院長 木林 博之

私は補綴専門医・指導医として日々プライドを持って診療に取り組んでおります。それを日々支えてくれているのがKaVoトリートメントユニットです。開業からエステチカ 1042、エステチカ 1066、エステチカ E80 Visionと25年に渡ってKaVoの最高機種ユニットを使用してきました。

患者さんにやさしいエステチカ E80 Vison




今回導入したリラックスラインは、従来のモデルからより美しくシックで快適に進化していますね。どんな体型の患者さんにも心地よくフィットして好評です。腰の角度を変えながらサポートするチルト機能が付加されたことで、患者さんの位置ズレや腰浮きがなくなりました。長時間にわたる外科処置でも体位が安定し、ドクターは治療に集中できますし、患者さんは疲労が少ないようです。私はもっぱら座位派ですが、シートの高さを90cmまで上げられるので、立位診療も可能で幅広いケースに対応できると聞いています。

KAVO
Dental Excellence

外科処置での使いやすさ

エステチカ E80 Visionでは、カートタイプを使用しています。外科処置では、カート上とサービステーブルを使い分け、清潔、不潔の器具の分別を行います。また、サービステーブルを患者さんの胸元に配置することで、よりスピーディーに効率よく処置をすすめることができます。セントロサポートシステムは、診療室内をすっきりさせる目的で初期に設置しました。

拡張性があるため、2代目ユニット導入時にプラスして外科用无影灯を取り付けました。KaVo製品は塗装や樹脂パーツまで重厚で劣化が少なく、今も設置当時のよい状態を維持できています。

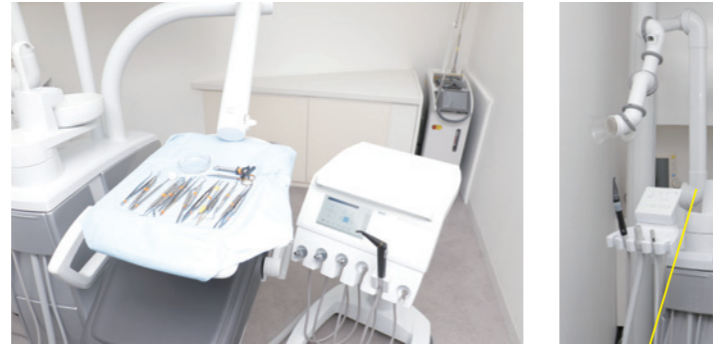

カート上のトレイとサービステーブルで清潔・不潔を分別 セントロサポートシステム

チェアの水平移動機能



足元の方にチェアをポジショニングした場合：キャビネット周辺のスペースが確保できる。

頭部方向にチェアをポジショニングした場合：アシスタントのスペースに余裕が動きやすい。



角度を調節して患者さんの腰をサポートするチルト機能

補綴専門医ならKaVo

タービンの切れ味は他メーカーの中でも群を抜いて優秀であると思っています。支台歯形成の場合、

- ・タービンM9000Lで荒削り
- ・5倍速M25Lで仕上げ
- ・エアスケーラー2003L／形成チップで最終仕上げ

を行うことで安定した形成が可能です。ユニットとタービンの相性が悪いと削れず、つい5倍速を多用しがちになりますが、KaVoのトリートメントユニットとタービンをセットで使用することで、それぞれの持ち味が発揮され、最大限のパフォーマンスを得られると感じています。



マイクロモーターは、これまでKaVo LUX KL モーター K200、KL700を使用してきた、トルクと回転の安定性を感じていました。今回KL 703を使用し、トルクと回転の安定に加えて、マイクロモーターの振動が少ないと実感し、特に気に入って愛用しています。KaVoマスターマティック M9000Lと5倍速コントラアングル マスターマティック M25Lはバーのブレがなく、切削したい場所にスムーズにアプローチすることができるため、治療時間の短縮につながっています。



KaVo LUX KLモーター 703 LED
KaVo従来品30%小型軽量化

補綴治療に欠かせない細かなアイテム

補綴治療の質を高めるアイテムが揃っており、トータルで使用することで治療の質を高め、チームのパフォーマンスを上げると感じます。

カプリング

ハンドピースの注水量が豊富で、歯牙やバーの過熱を防いでくれます。注水量が手元で調整できるので、形成の仕上げの際は注水を減らしています。



手元で注水量を調節

シリンジ

KaVoの3Wayシリンジは、エアーの回路に水が混ざらない構造なので、接着修復を阻害することがありません。エアーと水のボタン位置が他メーカーのものとは逆ですが、すぐに慣れるものですね。衛生士も抵抗なく操作しています。

歯面清掃器

プロフィーフレックス4を使用しています。支台歯の清掃に使用、補綴装置の接着に欠かせません。PMTCで使用する衛生士もエアーのパワーに満足しています。