


KaVo サージカル ハンドピース

サージマティック S15 L プロ

サージカル5倍速コントラアングル

- 増速 1:5 ライト付き
- 新技術「KaVoクールヘッドテクノロジー」
プッシュボタンを誤って押した場合でも、
ヘッド部の発熱を大幅に抑えることができます。

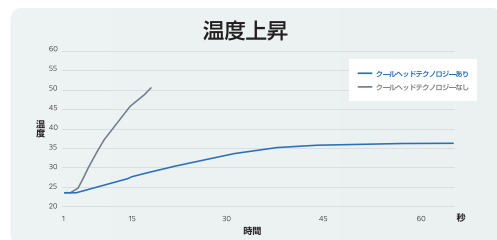

- 最適化された冷却注水スプレーにより、
バーのブレード部を確実に注水



標準価格:220,000円(税別)
キャンペーン特別価格

- 手にフィットしやすく、衛生性に優れたエキスパートグリップ
- 外部冷却注水システムの接続が可能

※サージマティック S15 L プロを使用するためには、マスターサージ LUXおよびエキスパートサージ LUXのファームウェアのバージョンをV.1.60以降に更新する必要があります。

サージマティック S201 XL プロ

20:1 サージカルコントラアングル ヘキサゴンクランプシステム対応モデル

- 減速:20:1 ライト付き
- 長い製品寿命を支えるヘキサゴンクランプシステム
- 最適化されたクランプシステムで、製品寿命が向上
- 着脱式のヘッドとシャンクで分解ができ、清掃が簡単
- 手にフィットしやすく、衛生性に優れたエキスパートグリップ
- 内部冷却注水システム(Kirschner and Meyer)を備えたコンパクトなヘッド
- 外部冷却注水システムへの接続が可能
- 最大トルク値 80 Ncm(ヘキサゴンクランプ使用時)



標準価格:
494,000円(税別)
キャンペーン特別価格

サージマティック S201 L プロ

20:1 サージカルコントラアングル

- 減速:20:1 ライト付き
- 着脱式のヘッドとシャンクで分解ができ、清掃が簡単
- 手にフィットしやすく、衛生性に優れたエキスパートグリップ
- 内部冷却注水システム(Kirschner and Meyer)を備えたコンパクトなヘッド
- 外部冷却注水システムへの接続が可能
- 最大トルク値 55 Ncm



標準価格:
480,000円(税別)
キャンペーン特別価格

サージマティック S11 L

サージカルストレートハンドピース

- 等速:1:1 ライト付き
- 手にフィットしやすく、衛生性に優れたエキスパートグリップ
- 外部冷却注水システム
- 最大トルク値 5.5 Ncm



標準価格:
170,000円(税別)
キャンペーン特別価格

マスターサージ 一般的名称:電動式骨手術器械 認証番号:227AIBZX00031000 管理医療機器
エキスパートサージ 一般的名称:電動式骨手術器械 認証番号:226AIBZX00039000 管理医療機器

KaVo
Dental Excellence

カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー
TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481
お問い合わせ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール)
<https://www.kavo.jp>

VICPJ2309V1 INS-140

2023 KaVo

KaVo サージカル キャンペーン

Surgical Campaign

キャンペーン期間

2023 10 | 23 月
2024 01 | 19 金

のご注文分まで

KaVoサージカルユニットとKaVoサージカルハンドピースをキャンペーン期間中特別価格にてご提供いたします。
KaVoのサージカル製品は高い精度をもたらし、日々の治療の快適性を向上させます。
買い替えおよび、万が一のトラブル対策の予備機器としてぜひ当キャンペーンをご活用ください。

KaVo サージカル ユニット



●マスターサージ LUX



●エキスパートサージ LUX

KaVo サージカル ハンドピース



●サージマティック S11 L サージカルストレートハンドピース

●サージマティック S201 L プロ サージカル減速コントラアングル 20:1

●サージマティック S201 XL プロ サージカル減速コントラアングル 20:1

●サージマティック S15 L プロ サージカル 5 倍速コントラアングル

KaVo
Dental Excellence

KaVo サージカルユニット

KaVoのサージカルユニット(マスターサージ LUX、エキスパートサージ LUX)は、世界最小・最軽量クラスのマイクロモーターを搭載し、80Ncmの高いトルク出力(インスツルメント接続時)により高い安定性と精度を実現します。

また、ワンタッチオートキャリブレーションにより、より安全な治療をもらたします。大型カラーディスプレイでわかりやすいアイコンによる操作も可能です。

マスターサージ LUX

優れた操作性

- ・ガラスタッチパネルスクリーンにより、簡単かつ直感的な操作
- ・最適な場所に設置可能なワイヤレスフットコントローラ
- ・トルク値グラフやデジタルデータをリアルタイムに表示し、治療をサポート
- ・データやグラフをSDカードに保存

高トルク出力と信頼性

- ・世界最小・最軽量クラスのサージカルモーターイントラLUX S600LED
- ・80Ncmを実現する高トルク出力(インスツルメント接続時)
- ・ワンタッチオートキャリブレーションにより、回転数とトルク値を正確に制御し、高い信頼性を実現

高いカスタマイズ性、簡単操作

- ・わかりやすいアイコンによるプログラム設定
- ・最大10プログラムの設定と各プログラムごとに最大10ステップの設定 (10×10)

タッチパネルディスプレイ

- ・独自のガラスタッチパネルスクリーンにより、容易で直感的な操作プログラミング
- ・反射防止ディスプレイにより、どの角度から見ても良好な視野




ワイヤレスフットコントローラ

- ・最適な場所に設置が可能



データの記録化

- ・治療過程を管理するためのトルク値グラフをリアルタイムに表示
- ・SDカードに保存、患者ファイルへの転送

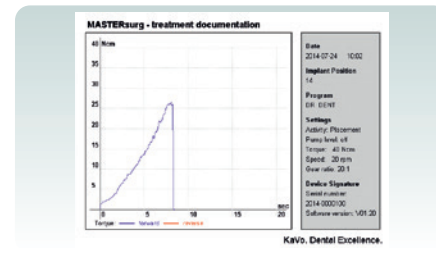

KaVo master series



標準価格: ~~720,000円~~(税別)
※ハンドピース別売
キャンペーン特別価格

ユーザーの声【マスターサージ LUX】


医療法人社団敬愛会 佐賀記念病院
歯科口腔外科 診療科長 中山 雪詩 先生

KaVo マスターサージ LUXの精度は、ワンタッチでのキャリブレーションを行うことができ、インプラント手術時に起始点形成からドリリングまたはアバットメントの締結に至るまで、安定した処置が可能となる。

歯科手術において最も侵襲的な歯や骨の切削や削合において、術式や手術に修練する事は当然のことであるが、この愛護的な処置が可能となるKaVo マスターサージ LUXやKaVo サージマティックインスツルメントは私たちの日常臨床の質を大いに高め、患者利益に直結してくれるものだと思信している。

インプラント埋入時のドリリング

安定した注水と軸ブレしないことにより安定した形成窩を形成することができる

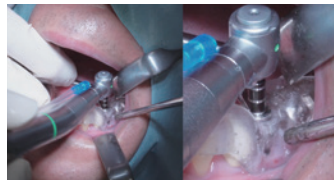

症例動画はこちら




世界最小・最軽量クラスのサージカルモーター KaVo イントラLUX S600 LED

・28%の軽量化と20%の小型化(全長)*

* KaVo イントラ LUX SL 550と比較



・起動時の高トルク出力と低振動を実現する スマートドライブテクノロジー

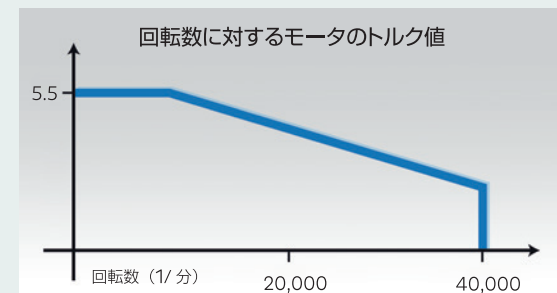

エキスパートサージ LUX

高トルク出力と信頼性

- ・世界最小・最軽量クラスのサージカルモーターイントラLUX S600LED
- ・80Ncmを実現する高トルク出力(インスツルメント接続時)
- ・ワンタッチオートキャリブレーションにより、回転数とトルク値を正確に制御し、高い信頼性を実現

簡単操作

- ・わかりやすいアイコンによるプログラム設定
- ・最大10ステップの設定 (1×10)

KaVo expert series



標準価格: ~~520,000円~~(税別)
※ハンドピース別売
キャンペーン特別価格

ユーザーの声【エキスパートサージ LUX】

松本デンタルオフィス
院長 松本 圭史 先生

KaVo エキスパートサージ LUXは、コンパクトであるので小規模のクリニックにおいても保管がしやすい。

また、カラーディスプレイのため非常に見やすく、手術時にモードを間違えることはまずない。また、ワンタッチオートキャリブレーション機能があるため、回転数、トルクを正確にコントロールしてくれる。また、骨形成時には、低速回転でもトルクが出て、高速回転でもブレは一切無い。またインプラント埋入時には、埋入トルク値がリアルタイムに出る。この機能は私が知る限り、他社にはなく、即時荷重を行う際に非常に参考になる値である。

KaVoエキスパートサージ LUXはほぼ毎日手術を行う私にとって、なくてはならない機器であり、より精度の高い手術を行えるようになったと確信している。

