

# 2024 KaVo ソニックフレックス チップキャンペーン オーダーシート

キャンペーン期間 / 2024年4月22日(月)～8月20日(火)のご注文分まで

貴医院名(必ずご記入ください。)	ご住所
Tel.	
お取り引きディーラー名	ご担当

チップはエアースケーラーの機種(2008と2003/2004LM)によって製品番号が異なりますのでご注意ください。

	製品名	標準価格 (税抜)	2008用	ご注文数	2003/2004LM用	ご注文数
ソニックフレックス チップ	ソニックフレックス チップ No.5 スケーリング ユニバーサル	<del>14,600</del>	5A 1.005.8949		5 0.571.5171	
	ソニックフレックス チップ No.6 スケーリング シックル	<del>14,600</del>	6A 1.005.8950		6 0.571.5181	
	ソニックフレックス チップ No.7 スケーリング ペリオ	<del>14,600</del>	7A 1.005.8951		7 0.571.5191	
	ソニックフレックス チップ No.8 スケーリング ペリオロング	<del>14,600</del>	8A 1.006.1953		8 0.571.5371	
	ソニックフレックス チップ No.60 パロ	<del>21,000</del>	60A 1.006.1934		60 0.571.7402	
	ソニックフレックス チップ No.61 パロ	<del>21,000</del>	61A 1.006.1935		61 0.571.7412	
	ソニックフレックス チップ No.62 パロ	<del>21,000</del>	62A 1.006.1936		62 0.571.7422	
	ソニックフレックス チップ No.48 クリーンブラシホルダー	<del>22,000</del>	48A 1.006.1982		48 0.571.0401	
	ソニックフレックス フラット型ブラシ 小 No.1 (5個入)	<del>3,700</del>	- 0.571.0402		- 0.571.0402	
	ソニックフレックス フラット型ブラシ 大 No.2 (5個入)	<del>3,700</del>	- 0.571.0412		- 0.571.0412	
	ソニックフレックス コニカル型ブラシ 小 No.3 (5個入)	<del>3,700</del>	- 0.571.0422		- 0.571.0422	
	ソニックフレックス コニカル型ブラシ 大 No.4 (5個入)	<del>3,700</del>	- 0.571.0432		- 0.571.0432	
	ソニックフレックス スパイラル型ブラシ 小 No.5 (5個入)	<del>3,700</del>	- 0.571.0472		- 0.571.0472	
	ソニックフレックス スパイラル型ブラシ 大 No.6 (5個入)	<del>3,700</del>	- 0.571.0482		- 0.571.0482	
	ソニックフレックス チップ No.66 エンド	<del>26,000</del>	66A 1.006.1992		66 1.000.5825	
	ソニックフレックス チップ No.67 エンド	<del>26,000</del>	67A 1.006.1994		67 1.000.5822	
	ソニックフレックス チップ No.68 エンド	<del>26,000</del>	68A 1.006.1996		68 1.000.5823	
	ソニックフレックス チップ No.69 エンド	<del>26,000</del>	69A 1.006.1998		69 1.000.5827	
	ソニックフレックス チップ No.70 エンド	<del>26,000</del>	70A 1.006.2000		70 1.000.5821	
	ソニックフレックス チップ No.45 シール	<del>26,000</del>	45A 1.007.1506		45 1.000.8323	
	ソニックフレックス チップ No.30 マイクロ	<del>27,000</del>	30A 1.006.1969		30 0.571.6811	
	ソニックフレックス チップ No.31 マイクロ	<del>27,000</del>	31A 1.006.1971		31 0.571.6801	
	ソニックフレックス チップ No.32 マイクロ	<del>27,000</del>	32A 1.006.1973		32 0.571.6831	
	ソニックフレックス チップ No.33 マイクロ	<del>27,000</del>	33A 1.006.1975		33 0.571.6821	
	ソニックフレックス チップ No.58 ベベル	<del>22,000</del>	58A 1.006.1988		58 0.571.7392	
	ソニックフレックス チップ No.59 ベベル	<del>22,000</del>	59A 1.006.1990		59 0.571.7382	
	ソニックフレックス チップ No.42 カリエクスD	<del>26,000</del>	42A 1.006.1980		42 1.000.7105	
	ソニックフレックス チップ No.43 カリエクスD	<del>26,000</del>	43A 1.006.1981		43 1.000.7167	
	ソニックフレックス チップ No.71 カリエクスTC	<del>26,000</del>	71A 1.006.2002		71 1.000.7362	
	ソニックフレックス チップ No.72 カリエクスTC	<del>26,000</del>	72A 1.006.2004		72 1.000.7363	
	ソニックフレックス チップ No.49 プレップゴールド	<del>29,000</del>	49A 1.006.1983		49 0.571.7212	
	ソニックフレックス チップ No.50 プレップゴールド	<del>29,000</del>	50A 1.006.1984		50 0.571.7222	
	ソニックフレックス チップ No.51 プレップセラム	<del>29,000</del>	51A 1.006.1985		51 0.571.7262	
	ソニックフレックス チップ No.52 プレップセラム	<del>29,000</del>	52A 1.006.1986		52 0.571.7272	
	ソニックフレックス チップ No.97 プレップクラウン	<del>26,000</del>	97A 1.008.6384		97 1.008.6383	
ソニックフレックス チップ No.98 プレップクラウン	<del>26,000</del>	98A 1.008.6386		98 1.008.6385		
ソニックフレックス チップ No.34 プレップCAD/CAM	<del>29,000</del>	34A 1.006.1977		34 1.002.1984		
ソニックフレックス チップ No.35 プレップCAD/CAM	<del>29,000</del>	35A 1.006.1979		35 1.002.1986		
ソニックフレックス エアースケーラー	ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック	<del>358,000</del>	2008L 1.007.1604		- - -	
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LX クイック	<del>324,000</del>	2008LX 1.005.9310		- - -	
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック	<del>295,000</del>	2008 1.007.1606		- - -	
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008X クイック	<del>260,000</del>	2008X 1.005.9311		- - -	
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LS クイック	<del>358,000</del>	2008LS 1.007.1605		- - -	
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LXS クイック	<del>324,000</del>	2008LXS 1.007.0540		- - -	
	ソニックフレックス エアースケーラー 2003L	<del>348,000</del>	- - -		2003L 1.000.8333	
	ソニックフレックス エアースケーラー 2003LX	<del>315,000</del>	- - -		2003LX 1.000.4243	
	ソニックフレックス エアースケーラー 2003	<del>283,000</del>	- - -		2003 1.000.8334	
	ソニックフレックス エアースケーラー 2003X	<del>248,000</del>	- - -		2003X 1.000.4246	
マルチフレックス カプリング	マルチフレックス LED カプリング 465LED	<del>64,000</del>	465LED 1.007.3197		465LED 1.007.3197	
	マルチフレックス LED カプリング 460LED	<del>41,000</del>	460LED 1.007.3201		460LED 1.007.3201	

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、お取り扱いディーラー様までお問い合わせください。



**カボ プランメカ ジャパン株式会社**  
 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー  
 お問い合わせ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール) FAX.03-6866-7481  
<https://www.kavo.jp>

VIFTJB2403V1-INS-146

## 2024 KaVo SONICflex Tip Campaign

診療への応用が広がる  
多彩なソニックフレックス チップ

スケーリング

カリエス除去

形成  
(プレパレーション)

エンド


2024 KaVo  
ソニックフレックス

# チップ キャンペーン

キャンペーン期間  
2024年  
4月22日(月)  
8月20日(火)  
のご注文分まで

- ソニックフレックス エアースケーラー
- ソニックフレックス チップ
- マルチフレックス カプリング

キャンペーン期間中  
特別価格にてご提供します。

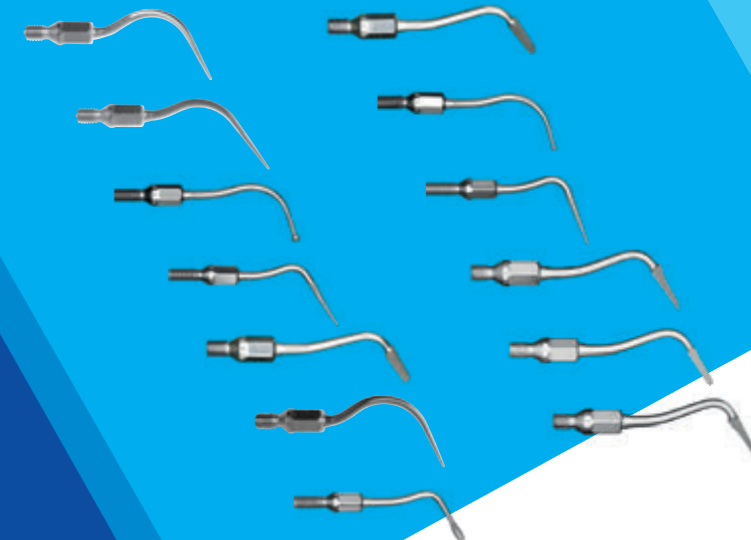




# ソニックフレックス チップ

KaVo ソニックフレックス エアスケーラーは、スケーリングからカリエス除去、プレパレーション、エンドまで、さまざまな症例に対応する豊富なチップを取り揃え、日々の治療をサポートします。

## 予防

### スケーリング

- 効率的でいたわりのある歯石除去
- 浅い歯周ポケットの清掃

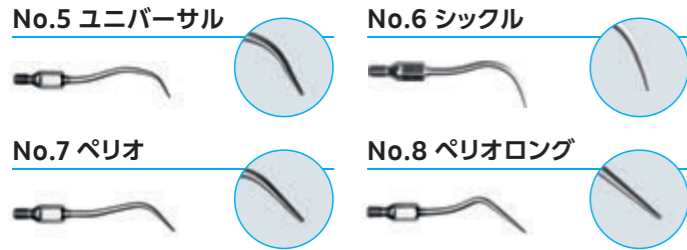

### 藤森 直子 先生 日米歯科衛生士

#### No.5 ユニバーサル 使用


大まかな歯石をソニックフレックスエアースケーラーで優しく効果的に落としていきます。優しいタッチで痛みの少ないソニックフレックス エアースケーラーの使用が患者さまの満足度を上げています。

## エンド

### Endodontics

### エンド

- 根管の診査／修正時の軟質の除去
- 根管口入口の明確化
- 根管形成のための髄室の明確化

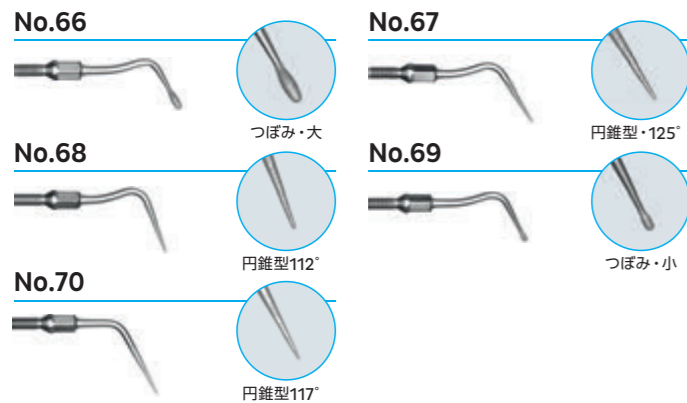

根管口の拡大形成や根管の拡大に使用します。また、根管内の歯質や充填材などを効率的に除去します。

販売名：ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック 認証番号：224AIBZX00059000  
 一般名称：歯科用エアースケーラー 管理医療機器・特定保守管理医療機器  
 販売名：ソニックフレックス エアースケーラー 2003 認証番号：21500BZY00311000  
 一般名称：歯科用エアースケーラー 管理医療機器・特定保守管理医療機器  
 販売名：ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM 認証番号：219AIBZX00100A01  
 一般名称：歯科用エアースケーラー 管理医療機器・特定保守管理医療機器  
 販売名：マルチフレックス カプリング 認証番号：218AIBZX00075000  
 一般名称：歯科用ガス圧式ハンドピース 管理医療機器・特定保守管理医療機器

### Prophylaxis

### クリーン

- 歯肉にやさしい清掃とポリッシング
- 適用範囲が広く使用が容易




## 歯周病治療

### Periodontology

### パロ

- 深さ9mmまでの深い歯周ポケットを優しく効果的にクリーニング

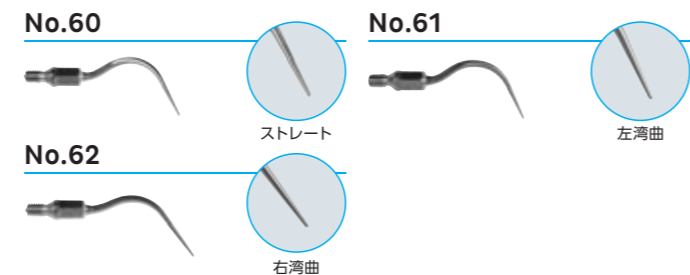

## 修復

### Restoration

### プレップ (形成)

- フィニッシュラインとマージンラインとの適合性を向上させ、短時間でも手用研削具のようなプレパレーションが可能



### 二宮 佑介 先生 ニノデンタルオフィス 院長

#### プレップセラム No.51とNo.52 使用


難しい隣接面のアプローチもソニックフレックスエアースケーラーを使用することで、片側のみの窩洞形成を隣在歯を傷つけることなくより確実に行えます。

## MI

### Minimally Invasive

### マイクロ

- 微小かつアクセスが困難な領域のための特殊チップ
- 片面にだけダイヤモンドが焼着されたチップで、咬合または歯間部の初期カリエスに直接アクセスが可能
- ラミネートベニアの最終形成の仕上げ
- 健康な歯質のメンテナンス

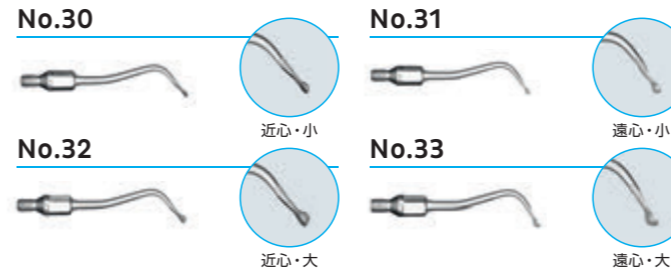

### 中山 雪詩 先生 佐賀記念病院 歯科・口腔外科 診療科長


#### マイクロ No.30とカリエクスD No.42 使用

隣接面う蝕の治療は、臨在歯や歯肉縁下の保護が優先されます。マイクロは半球型であり、臨在歯を傷つけることなく窩洞形成し、その後カリエクスを使用することで、健全歯質を必要以上に除去することなく、形成を行うことができます。



### カリエクス

- カリエスに罹患したデンティン部の探査用チップ
- カリエクスD: ごくわずかなう蝕病変の除去に
- カリエクスTC: 大きなう蝕病変の除去に

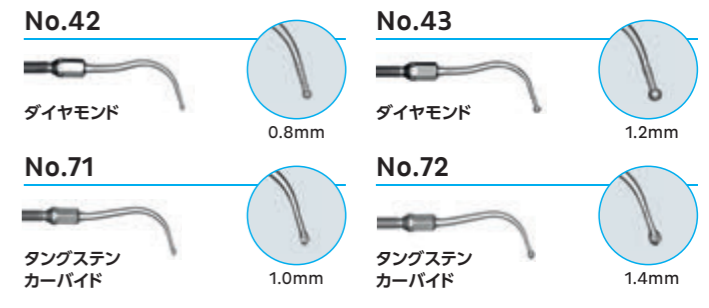

### ベベル

- 形成した小病変の特殊ベリング用仕上げに片面ダイヤモンドコーティングしたチップ
- 接着の適正化
- 辺縁部の漏出の最小化



### シール

- 裂溝カリエスの探査・形成用チップ
- ダイヤモンドコーティング



## ソニックフレックス エアースケーラー

KaVo ソニックフレックス エアースケーラーは患者さまに安全でより痛みの少ない治療を提供します。

### ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック

- 軽くひねるだけでチップを素早く簡単に交換
- 3段階のレベル調節 (120μm・160μm・240μm)
- 運動方向: ループ状
- プラズマコーティング
- ガラスロッドライト (2008L/2008LSシリーズ)
- チップ No.5A/6A/7A付き (2008/2008L/2008LSのみ)
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)
- 24か月保証
- KaVoマルチフレックスカプリングまたはシロナカプリング (S) に接続可能

KaVo master series

### ソニックフレックス エアースケーラー 2003L

- 3段階のレベル調節 (120μm・160μm・240μm)
- 運動方向: ループ状
- プラズマコーティング
- ガラスロッドライト (2003L/2003LXのみ)
- チップ No.5/6/7付き (2003/2003Lのみ)
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)
- 24か月保証
- KaVoマルチフレックスカプリングに接続可能

KaVo expert series

### ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM

- 運動方向: ループ状
- プラズマコーティング
- ガラスロッドライト
- チップ No.5/6/7付き
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)
- 24か月保証
- モリタαカプリングに接続可能

### 岡口 守雄 先生 岡口歯科医院 院長

ソニックフレックスエアースケーラーは、修復から補綴、ペリオ、エンドなどのチップが揃っているので、それぞれの処置に応じて使い分けすることができます。

## マルチフレックス カプリング

エア回路を使用するすべてのKaVoインスツルメントに接続することができます。

### マルチフレックス LED カプリング 465LED

- 4ホールLUXコネクション
- ロック機能付き
- 逆止弁内蔵で逆流防止
- LEDライト付き



### マルチフレックス LED カプリング 460LED

- 4ホールLUXコネクション
- 逆止弁内蔵で逆流防止
- LEDライト付き

