

KaVoフラグシップクラスの主な機能をコンパクトにまとめて搭載



新型シートのスリムでスポーティーな外観、エルゴノミクスに基づく新設計のチェア構造、排水管の自動洗浄機能を標準装備しています。

NEW バックレスト

横幅が広く患者さんをしっかりとサポートするプログレスバックレスト

NEW チェア構造

チェア下の広いスペースにより、患者さんに近づきやすく、より自然な姿勢で診療が行えるチェア構造

NEW ジャンクボックス

すっきりとした外観のスリムなジャンクションボックスとベースプレート

NEW アームレスト

静かでソフトにストップする回転式アームレスト



KaVoダイアグノカム Vision Full HDを接続メディア機能も充実

KaVo口腔内カメラで撮影した画像をタッチディスプレイで呼び出し、モニターに映し出すことができます。メディア機能は、医院オリジナルのライドショーや患者さんへのお知らせなどの用途にご利用いただけます。*オプション



良質な照明

KaVo LUX 540 LED

- 色調(色温度)の変更
- 最大40,000ルクスの照明
- コンボセンサーモード
- 口腔内を奥まで照らす3Dジョイント




reddot design award winner 2012



操作性のよいデジタルオペレーティング
エア回路、モーター回路ともに、回転数やスプレー水などの設定ができ、エンド機能の複雑なステップも、事前にステップを登録して治療中はより簡単な操作で行えます。

安定した高トルク スマートドライブテクノロジー搭載

- 100回転でフルトルク
- 低速でも安定した回転力とスムーズな立ち上がり

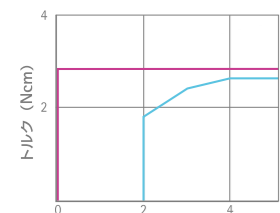

SMARTdrive
INFORM TECHNOLOGY



高トルク小型軽量モーター イントラ LUX KL モーター 703 LED

- 小型・軽量化(当社従来品比30%)
- 振動が少なく高トルクのブラシレスモーター
- 形成、エンド、PMTC等で、KaVoユニットの有効性を発揮



標準搭載

ハイドロクリーンシステム
ユニット内でデカセプトルゲルを自動充填し、診療後の排水管のメンテナンスが容易に行えます。

強力なバキュームシステム

KaVoのユニットは、歯髄を守るために大量のスプレーミストが出ます。汚染したスプレーミストを口腔内で吸い取るためにバキュームの吸引量を高めて効率の良い吸引をしています。



自動フラッシング

毎朝、診療開始前にユニット内の水を一旦洗い出すリンス機能(フラッシング)です。



ビルトイン・ハイジーンアダプター



豊富な注水量

50ml/分の豊富な注水量で歯牙の温度上昇から歯髄を守ります。



販売タイプ: テーブルタイプ、スイングアームタイプ、カートタイプ
販売名: カボ ユニカ 一般的名称: 歯科用ユニット 認証番号: 304AKBZX00078000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: ダイアグノカム Vision Full HD 一般的名称: 歯科診断用口腔内カメラ 認証番号: 305AIBZX00001000 管理医療機器

*写真にはオプションが含まれています。



カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー
TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481
お問い合わせ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール)
<https://www.kavo.jp>

VECPJB2402V1 EQU-124



W デザインアワード キャンペーン2024

2024.03.21 THU >>>> 12.27 FRI 設置有効



グッドデザインアワード
世界で最も歴史の長い
アメリカの権威あるデザイン賞



ドイツデザインアワード
国際的に有名なドイツのデザイン賞

お見積りはディーラー様にお問い合わせください。
弊社ホームページからもお見積りをお申込みいただけます。



会員登録サイトはこちら。
*会員のご登録が必要になります。(無料)



UNIQA



グッドデザイン・アワード



ドイツ・デザイン・アワード

ドイツデザインカウンシルからの表彰理由のコメント

KaVo uniQaは、コンパクトで包括的にもモダンで高品質のデザイン、美観と機能性を兼ね備え、技術的に新しいだけでなく、人間工学的にも優れた設計です。歯科医師は快適で効率的な診療ができ、患者さんはリラックスして横たわれる。これらすべてが、多くの人の歯科受診への嫌悪感や恐怖感を緩和し、診療ユニットに座ることに対する抵抗を軽減することに貢献している。

Wデザインアワード 特別セット

2つのKaVo水消毒システム

2つの水消毒システム 過酸化水素水を使用した常時水消毒と集中水消毒の2つの水消毒システムで給水ラインの水路管内を清潔に保ちます。

パネルカラーアップグレード



Street Art Edition

ストリートアーティスト Stone Graffiti氏による KaVo uniQa世界限定40台。印象的でそれぞれが一点もののユニークなパネルです。



*写真にはオプションが含まれています。