

2024 KaVo PMTCキャンペーン オーダーシート

キャンペーン期間 / 2024年5月21日(火)～8月20日(火)のご注文分まで

貴医院名(必ずご記入ください)	ご住所	Tel.
お取り引きディーラー名	ご担当	

	製品番号	製品名	標準価格(税抜き)	ご注文数
エアースケーラー	1.007.1604	ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック	358,000	
	1.005.9310	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LX クイック	324,000	
	1.007.1606	ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック	285,000	
	1.005.9311	ソニックフレックス エアースケーラー 2008X クイック	260,000	
	1.007.1605	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LS クイック	358,000	
	1.007.0540	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LXS クイック	324,000	
	1.000.8333	ソニックフレックス エアースケーラー 2003L	348,000	
	1.000.4243	ソニックフレックス エアースケーラー 2003LX	315,000	
	1.000.8334	ソニックフレックス エアースケーラー 2003	283,000	
	1.000.4246	ソニックフレックス エアースケーラー 2003X	248,000	
	1.006.6871	ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM	219,000	

	製品番号	製品名	標準価格(税抜き)	ご注文数
2008用	1.005.8949	ソニックフレックス チップ No.5A スケーリング ユニバーサル	14,600	
	1.005.8950	ソニックフレックス チップ No.6A スケーリング シックル	14,600	
	1.005.8951	ソニックフレックス チップ No.7A スケーリング ペリオ	14,600	
	1.006.1953	ソニックフレックス チップ No.8A スケーリング ペリオロング	14,600	
	1.006.1982	ソニックフレックス チップ No.48A クリーンブラシホルダー	23,000	
	1.006.1934	ソニックフレックス チップ No.60A パロ	21,000	
	1.006.1935	ソニックフレックス チップ No.61A パロ	21,000	
	1.006.1936	ソニックフレックス チップ No.62A パロ	21,000	
	0.571.5171	ソニックフレックス チップ No.5 スケーリング ユニバーサル	14,600	
	0.571.5181	ソニックフレックス チップ No.6 スケーリング シックル	14,600	
	0.571.5191	ソニックフレックス チップ No.7 スケーリング ペリオ	14,600	
2003用	0.571.5371	ソニックフレックス チップ No.8 スケーリング ペリオロング	14,600	
	0.571.0401	ソニックフレックス チップ No.48 クリーンブラシホルダー	23,000	
	0.571.7402	ソニックフレックス チップ No.60 パロ	21,000	
	0.571.7412	ソニックフレックス チップ No.61 パロ	21,000	
	0.571.7422	ソニックフレックス チップ No.62 パロ	21,000	
	0.571.0402	ソニックフレックス フラット型ブラシ 小 No.1 (5個入)	3,700	
	0.571.0412	ソニックフレックス フラット型ブラシ 大 No.2 (5個入)	3,700	
	0.571.0422	ソニックフレックス コニカル型ブラシ 小 No.3 (5個入)	3,700	
	0.571.0432	ソニックフレックス コニカル型ブラシ 大 No.4 (5個入)	3,700	
	0.571.0472	ソニックフレックス スパイラル型ブラシ 小 No.5 (5個入)	3,700	
	0.571.0482	ソニックフレックス スパイラル型ブラシ 大 No.6 (5個入)	3,700	

	製品番号	製品名	標準価格(税抜き)	ご注文数
歯面清掃用器具 歯面清掃用器具オプション品	3.002.8000	プロフィーフレックス 4 ウェーブ	208,000	
	3.002.8200	プロフィーフレックス 4 ライム	208,000	
	3.002.8800	プロフィーフレックス 4 フラミンゴ	208,000	
	3.004.5900	プロフィーフレックス 4S ウェーブ	208,000	
	3.004.5930	プロフィーフレックス 4S ライム	208,000	
	3.004.5950	プロフィーフレックス 4S フラミンゴ	208,000	
	1.011.9403	プロフィーフレックス 4 ペリオキット	48,000	

	製品番号	製品名	標準価格(税抜き)	ご注文数
歯面研磨材	1.010.1826	プロフィーパール ニュートラル スティックタイプ (15g×80袋)	23,000	
	1.010.1828	プロフィーパール ミント スティックタイプ (15g×80袋)	23,000	
	1.010.1829	プロフィーパール ピーチ スティックタイプ (15g×80袋)	23,000	
	1.010.1830	プロフィーパール オレンジ スティックタイプ (15g×80袋)	23,000	
	1.010.1831	プロフィーパール カシス スティックタイプ (15g×80袋)	23,000	
	1.013.4400	プロフィーパール セレクション スティックタイプ (15g×80袋)	23,000	
	1.007.0014	プロフィーフレックス パウダー オレンジ (15g×80袋)	21,000	
	1.007.0015	プロフィーフレックス パウダー ベリー (15g×80袋)	21,000	
	1.007.0016	プロフィーフレックス パウダー チェリー (15g×80袋)	21,000	
	1.007.0017	プロフィーフレックス パウダー ミント (15g×80袋)	21,000	
	1.009.3732	プロフィーフレックス ペリオパウダー (100g×4本)	15,000	

	製品番号	製品名	標準価格(税抜き)	ご注文数
ポリッシング用コントラングル	1.009.3610	マスターマティック LUX M07L	154,000	
	1.008.1824	イントラヘッド L31 プロフィー	53,000	
	1.008.4998	エキスパートマティック E31C	150,000	
	1.011.6760	スマートマティック プロフィー S31	66,000	
	1.011.6800	スマートマティック プロフィー S33	58,000	

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、お取り引きディーラー様までお問い合わせください。



カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー
 TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481
 お問い合わせ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール)
<https://www.kavo.jp>

VITFJB2404V1 INS-147

2024 KaVo PMTC キャンペーン

～すべては笑顔のために～

効率的で患者さんにやさしい治療

KaVoのPMTC関連製品はスケーリング、歯面清掃(エアポリッシング)、ポリッシングに至るまで、より迅速で簡単かつ効率的な予防治療を可能にし、術者と患者さんの笑顔を実現します。

キャンペーン期間

2024年5月21日(火)～
8月20日(火)のご注文分まで

キャンペーン期間中、
対象製品を特別価格にて
ご提供いたします。



Scaling

ソニックフレックス エアースケーラー





Air Polishing

プロフィーフレックス 4





Polishing

マスターマティック・イントラヘッド
エキスパートマティック
スマートマティック







KaVo ソニックフレックス エアースケーラー

頑固な歯石も簡単に除去

パワフルさと静音設計を兼ね備えたKaVo ソニックフレックス エアースケーラーは、頑固な歯石を徹底的にしかも優しく除去します。

ソニックフレックス エアースケーラー

■ ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック

- 軽くひねるだけでチップを素早く簡単に交換
- 3段階のレベル調節(120 μ m・160 μ m・240 μ m)
- 運動方向:ループ状
- プラズマコーティング
- グラスロッドライト(2008L/LX, 2008LS/LXSのみ)
- チップ No.5A/6A/7A付き(2008/2008L/2008LSのみ)
- オートクレープ滅菌可能(135℃まで)
- 24カ月保証

KaVo master series



■ ソニックフレックス エアースケーラー 2003L

- 3段階のレベル調節(120 μ m・160 μ m・240 μ m)
- 運動方向:ループ状
- プラズマコーティング
- グラスロッドライト(2003L/2003LXのみ)
- チップ No.5/6/7付き(2003/2003Lのみ)
- オートクレープ滅菌可能(135℃まで)
- 24カ月保証

KaVo expert series



■ ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM

- モリタ α カプリングに接続可能
- 運動方向:ループ状
- プラズマコーティング
- グラスロッドライト
- チップ No.5/6/7付き
- オートクレープ滅菌可能(135℃まで)
- 24カ月保証



ソニックフレックス チップ

■ スケーリング

- 効率的でいたわりのある歯石除去
- 浅い歯周ポケットの清掃



藤森 直子 先生 日米歯科衛生士


No.5 ユニバーサル 使用

大まかな歯石をソニックフレックスエアースケーラーで優しく効果的に落としていきます。優しいタッチで痛みの少ないソニックフレックス エアースケーラーの使用が患者さまの満足度を上げています。



■ クリーン

- 歯肉にやさしい清掃とポリッシング
- 適用範囲が広く使用が容易

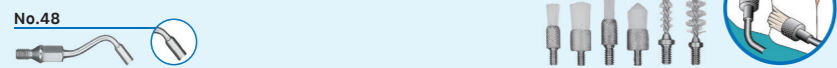

■ パロ

- 深さ9mmまでの深い歯周ポケットを優しく効果的にクリーニング



KaVo プロフィーフレックス 4

簡単で効率的なクリーニング

KaVo プロフィーフレックス 4は、歯肉縁上および歯肉縁下のクリーニングに対応するオールラウンダーな歯面清掃器です。患者さんや術者の負担を軽減し、快適なクリーニングを提供します。

プロフィーフレックス 4

■ KaVo プロフィー フレックス 4

- 先端のノズルを交換するだけで、歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニングが可能
- 水とパウダーの混合噴霧システム採用
- パウダーの飛散を防ぎ、歯面にやさしいクリーニング
- 3色のカラフルなハンドピースボディ(フラミンゴ・ウェーブ・ライム)



ひとりひとりに合わせて

長さの異なる2種類のグリップスリーブから手にフィットするものをお選びいただけます。ハンドピースをクリニック内で共有する際にも便利です。

効果的なクリーニング

焦点エリアが小さく、正確にパウダーを噴霧させることで、パウダーの飛散を抑えます。また、ノズルが細いため、歯肉縁上のクリーニング時にも視野が確保しやすいです。

パウダー量3段階調節

レベル1はパウダー噴霧がなく、ハンドピース内の残留したパウダーを除去します。レベル2および3では、患者さんや症例に応じてクリーニングレベルを調節します。

プロフィーフレックス パウダー

■ KaVo プロフィー パール

歯面に優しいクリーニング

- 主成分:炭酸カルシウム(粒子径60~70 μ m)
- 一定したサイズの球形粒子で、効率よくやさしいクリーニング
- 着色やバイオフィルムを効果的に除去
- 各15g×80袋



■ KaVo プロフィーフレックス パウダー

スピーディーかつ効率的なクリーニング

- 主成分:重炭酸ナトリウム(粒子径60~70 μ m)
- 一定したサイズの球形粒子で、効率よくやさしいクリーニング
- 着色やバイオフィルムを効果的に除去
- 各15g×80袋



■ KaVo プロフィーフレックス ペリオパウダー

歯肉縁下のクリーニング


- 主成分:グリシン(粒子径18~22 μ m)
- 歯周ポケット内の効果的なバイオフィルム除去
- クラウンやブリッジ、インプラント周辺のクリーニング
- 歯面に優しく磨耗が少ない(低研磨性)
- 100g×4本



■ プロフィーフレックス 4 ペリオキット

ポケット内のメンテナンス

- ポケット内のバイオフィルムを除去
- インプラント周辺のクリーニング
- プロフィーフレックス ペリオパウダーと使用
- ペリオパウダー(20g)付き

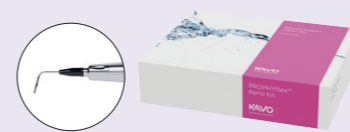

KaVo ポリッシング用ハンドピース

スムーズな回転による優しいポリッシング

KaVoポリッシング用ハンドピースは、健康な歯を維持するために優しくかつ効果的な処置を実現します。

スマートマティック

経済的で優れた操作性

- スマートマティック プロフィー S31
 - 減速比 8:1
 - スナップオン/スクリューインタイプ
 - 360°回転
 - ライトなし
 - 注水なし
 - 12ヶ月保証


■ スマートマティック プロフィー S33

- 減速比 8:1
- スナップオンタイプ
- 70°の反動運動
- ライトなし
- 注水なし
- 12ヶ月保証

KaVo smart series



ヘッド内部へのペーストの侵入を防ぐVシーリング

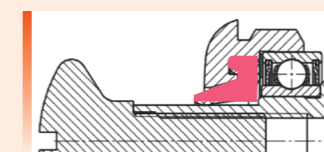

臼歯部へのアクセスもスムーズ



エキスパートマティック

効率の良い処置

- エキスパートマティック E31C
 - 減速比 5.4:1
 - スナップオン/スクリューインタイプ
 - 360°回転
 - ライトなし
 - 注水付き
 - ペーストを使用した後に水でしっかりペーストを洗い流しながら仕上げが可能
 - 研磨材の侵入を防ぐヘッドの特殊構造
 - 手にフィットしやすいエキスパートグリップ
 - 24カ月保証

KaVo expert series



マスターマティック+イントラヘッド

ヘッドを交換するだけでポリッシング用ハンドピースに

- イントラヘッド L31 プロフィー (ヘッド)
 - 減速比 2:1
 - スクリューイン/スナップオンタイプ
 - 360°回転
 - 研磨材の浸透を防ぐマルチシール
 - 最大入力回転数...15,000rpm
 - 24ヶ月保証

KaVo master series



■ マスターマティック LUX M07L(シャック)

- 減速比 2.7:1
- ライト付き
- 注水付き
- 優れたグリップ感と衛生性のプラズマコーティング
- 24ヶ月保証

