

特別
セットB ① 追加 エアー回路 ※スタンダードヘッドタービン


KaVo マスタートルク LUX M9000L

スタンダードヘッドタービン


ハイパワー、静音設計、より高い安全性と操作性

- ハイパワー31W
- ダイレクトストップテクノロジー
約1秒以内でバーの回転が停止
サックバック0.000001bar以下
- 高音域を抑えた静音設計
- 選べるカラーパリエーション
(シルバー・チョコレートブラウン・アンズラサイト)

約1秒以内でバーが停止
診療中の安全性が向上します。また、
バーを素早く交換できスムーズな
治療を実現します。

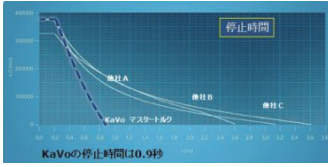

サックバック0.000001bar以下
ダイレクトストップテクノロジーの採用により
ハンドピース内への血液や感染物質の吸引
(サックバック)がなく、衛生性が向上します。

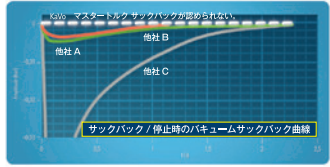

KaVo master
series

信濃の
24ヶ月保証



特別
セットB ② 追加 モーター回路 ※ライト付き5倍速コントラアングル

KaVo マスターマティック LUX M25L

ライト付き5倍速コントラアングル

優れたトルク伝達・静音/低振動・操作性

トリプルギアシステム

KaVo独自のトリプルギアシステムは、
最適なトルク伝導で振動や芯ブレを抑え、
精度の高いスムーズな治療を提供します。



小型ヘッドサイズ

ヘッドサイズが従来品(25LP)と
比べてコンパクトになり、可視性
と視野角度が向上しました。




チャック保持力30N

30Nのチャック保持力でバーを確実に保持、
芯ブレのない精度の高い回転を生み出します。
繰り返しの滅菌にも耐え、長期間にわたり高い
品質を維持します。

交換可能なスプレー水フィルター
水づまりを防ぎ常に良好な給水が得られ
不要なダウンタイムがありません。



ヘッド角度100°グリップ角度19°
アクセスしやすい臼歯部にも優れた操作性で
思いどおりの治療を可能にします。

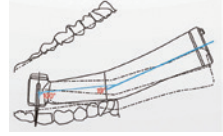

優れた滅菌耐久性

1928年に世界で初めて滅菌可能なハンドピースを開発して
以来、KaVoは常に滅菌耐久性に優れた高品質な部品や設計、
製造工程の改良に努めてきました。繰り返しの滅菌にも耐え、
高い品質を維持するKaVoのハンドピースは世界中の多くの
お客さまから高い評価を得ています。



KaVo master
series

信濃の
24ヶ月保証



販売名: マスターマティック
一般的名称: ストラート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 227AIBZX00026000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

KaVo Primus プリムス 1058 Life

世界52,000台の実績

補綴からPMTCまで幅広く対応
堅牢性・切削性・操作性・衛生性を装備

- ▶ エアー／モーター回路の最大値・最小値を
メモリーできるメモスピード (オプション)
- ▶ 100回転からフルトルクが得られる
スマートドライブテクノロジー
- ▶ シリンジに持ち替える必要がないチップエアー
- ▶ 最大許容荷重 185kg (スタンダードチェア)
- ▶ コンパクトチェアもラインナップ

販売名: プリムス 1058 Life
一般的名称: 歯科用ユニット 認証番号: 228AIBZX00014000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

KaVo uniQa

Premium Compact

KaVoフラッグシップクラスの主な機能を
コンパクトにまとめて搭載

- ▶ 操作性のよいデジタルオペレーティング
- ▶ 標準搭載「ハイドロクリーンシステム」
- ▶ エルゴノミクスに基づくチェア構造



販売名: カボ ユニカ
一般的名称: 歯科用ユニット 認証番号: 304AKBZX00078000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

KaVo Innovation

2つのKaVo水消毒システム

一歩進んだ衛生管理

① 常時水消毒システム

インスツルメントとスピットンに低濃度の過酸化水素水を使用し、
水路管を衛生的に保ちます。

② 集中水消毒システム

休院前に少し濃度の高い過酸化水素水を30分間水路管内に
滞留させて、バクテリアの繁殖等を防ぎます。



オキシゲナル 6
濃度6%の
過酸化水素を
含む溶液

自動フラッシング

毎朝、診療開始前にユニット内の水を一旦洗い出す
リンス機能(フラッシング)です。
低濃度の過酸化水素水でハンドピース毎に各2分間の
リンスを実施します。



ホースを戻さず翌朝の
フラッシングを一連の
作業ステップで実施する
こともできます。

KaVo Innovation 2025 Model Change & Upgrade Campaign

KaVo イノベーション 2025 キャンペーン

キャンペーン期間

2025年5月21日(※) ~ 12月26日(※) (設置有効)

KaVo uniQa・エステチカ E70/E80 Visionのモデルチェンジユニットは、先行予約・設置可能日は9月以降を予定

KaVo Primus

uniQa

ESTETICA

KaVo uniQa・エステチカ E70/E80 Visionが、次世代のタッチディスプレイに
なり外観も機能もアップグレード。
こちらを記念して診療でご活用いただけるオプションおよびハンドピース製品を
特別セットにしたKaVoトリートメントユニットキャンペーンを企画いたしました。

campaign price

特別
セット価格

Model Change & Upgrade

KaVo Primus
プリムス 1058 Life

特別セットA

KaVo水消毒システム
モーターをアップグレード
(イントラ LUX モーター KL 703 LED)

KaVo uniQa

特別セットA

KaVo水消毒システム

KaVo ESTETICA
エステチカ E70 Vision

特別セットA

電動スピットン
フィジオ エボ(ドクターズツール)
スピットンボウル「エレガンス」
カラーパネルにアップグレード

KaVo ESTETICA
エステチカ E80 Vision

特別セットA

フィジオ エボ
(ドクターズツール)
スピットンボウル「エレガンス」

特別セットB (1または2からお選びいただけます)

① 追加 エアー回路 X
マスタートルク LUX M9000L (タービン)

② 追加 モーター回路 X
マスターマティック LUX M25L (5倍速コントラ)

お見積りはディーラー様にお問い合わせください。
弊社ホームページからもお見積りをお申込みいただけます。



会員登録サイトはこちら。

KaVo
Dental Excellence

KaVo ESTETICA エステチカ E70 Vision

高い快適性と実用性

- ▶ 6つの衛生機能:
常時水消毒・集中水消毒・ハイドロクリーン・
自動フラッシング・リンス・アクアマット
- ▶ デジタルオペレーティング: メモリーの確認、
一括呼び出しなど操作がよりわかりやすく
- ▶ サスペンド式チェア: 足元に広いスペースを確保
- ▶ 大きな患者さんにも安心対応:
チェア許容荷重180kg、余裕のチェアパワー



販売名: カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
一般的名称: 歯科用ユニット 認証番号: 227AIBZX00036000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

KaVo ESTETICA エステチカ E80 Vision

インプラント・マイクロスコープ対応機種
治療ポジションを自在に調整

- ▶ インプラント用エンジンと直接接続可能(オプション)
・ユニットと共用のフットコントローラ
・ワンタッチ操作の容易なキャリブレーション
・サージェリーモーター 高トルク 80Ncm
・統合型の生理食塩水ポンプ
- ▶ チェアの水平移動・スローモーション機能で術野の
容易な位置調整



販売名: カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
一般的名称: 歯科用ユニット 認証番号: 227AIBZX00036000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision専用カラーパネル

患者さんがリラックスする魅力的な診療室に演出。
エステチカ E70/E80 Visionだけの
特別なパネルカラー全4色。



ブルー・シルバー
メタリック
シルバー
メタリック
コーヒー
メタリック
ロゼ
メタリック



全14色 (RELAXlineは全10色)



※掲載の写真にはオプションが含まれます。



KaVo
エステチカ E70/E80 Vision

診断に必要な数多くの機能を統合搭載し、複雑な準備や手順を簡単にしています。エンド用のモーター機能や外科用のモーターもユニットに統合して使用できます。

また、サスペンド式チェアのコンセプトにより、人間工学に基づいた作業と正確で効率的なワークフローを実現しています。

KaVo ESTETICA KaVo uniQa

ユニット本体のクイック起動

タイムロスのない診療準備

ユニット本体の起動時間が短縮され、毎朝、起動時間を待つことなく診療準備を行えます。



KaVo ESTETICA KaVo uniQa

デザインライト

お手入れのステータスをお知らせ

バックレストと座板の接続部の照明は、デザインとしての照明だけでなく、お手入れの状況をお知らせする機能を兼ね備えています。



ライトがOFFの場合は、お手入れ実施中、点滅はハイジーンアダプターに接続したハンドピースホース類を戻すお知らせ。

KaVo uniQa

新プログレスバックレスト

エルゴノミクスに基づくシート

肩の部分が狭くスリムなため、術者は患者さんにアクセスがしやすく、人間工学的な診療姿勢が得られます。

また、肘の部分が広い形状になっており、患者さんは肘をしっかりと乗せることができるので、リラックスした状態で診療を受けることができます。

RELAXlineシート
二層の構造で上層部に低反発素材を使用、表面にステッチが施されたレザー調シート

KaVo uniQa

デザインライン

シートの外観を洗練

ユニットのデザインに合わせた統一感のあるデザインラインをバックレストと座板に施し、一層スポーティーな外観になりました。




KaVo Innovation

精度の高い治療

スマートドライブテクノロジー搭載

安定したモーター回転の立ち上がりと芯ブレの少ない切削

- 100回転でフルトルク
- 低速でも安定した回転力とスムーズな立ち上がり

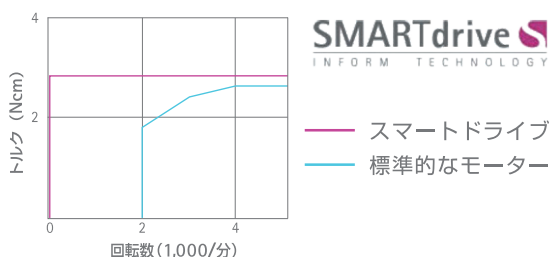

※掲載の写真にはオプションが含まれます。

KaVo Innovation 2025 Campaign

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision · KaVo uniQa Model Change & Upgrade

KaVo Innovation
ユニット本体のクイック起動

KaVo Innovation
即応答タッチディスプレイ

KaVo Innovation
ダブルディスプレイ (テーブルタイプ)

KaVo Innovation
デザインライト

KaVo Innovation
スイングアーム 3段階ロックシステム

KaVo Innovation
新型DVGWウォーターブロック




*12.3インチはテーブルタイプのみですが、その他のタイプも次世代タッチディスプレイ。

KaVo ESTETICA KaVo uniQa

次世代タッチディスプレイ -12.3インチのワイドスクリーン-

タッチディスプレイの反応速度が向上し、素早い操作が行えます。

常に、チェアの操作画面と診療画面をダブルで表示することができ、診療中に画面を切り替える必要がありません。ディスプレイは、使い易いように左右の画面を入れ換えることもできます。

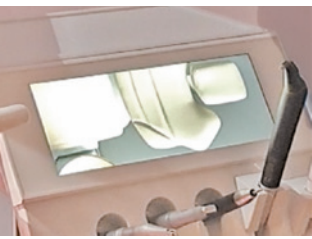

スクリーンセーバー


タッチディスプレイのスクリーンセーバーをご利用いただけます

医院のロゴなど医院様独自の画像をスライドショーにて表示することができます

KaVo ESTETICA KaVo uniQa

新 選べるスピットンボウル

シート色と合わせてクリニックを演出

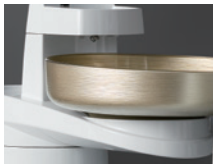

E70/E80 Vision: 陶器またはガラス エレガンス (オプション)




uniQa: 陶器またはガラス スモーキー グレー (標準・選択)

KaVo uniQa

新形状のスピットン部



エッジが印象的な新しい形状のスピットン部は、KaVo uniQa全体のデザインと統一感を持たせたデザインです。

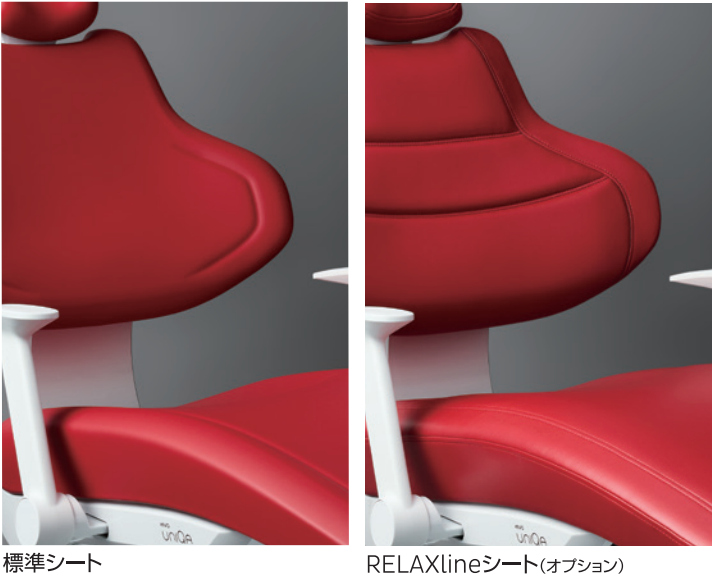

標準シート

RELAXlineシート (オプション)

KaVo uniQa

プレミアムフットレストカバー

耐久性を向上

KaVo uniQa専用のプラスチック製フットレストカバーで、ユニットの外観に合うようデザインされています。

拭き掃除が容易に行え、はめ込み式なので取り外しも簡単です。



KaVo Innovation

エルゴノミクス

サスペンド式チェア

最低位は350mm、最高位900mmの範囲で調節でき、座位でも立位でも快適に治療が行えます。


(エステチカ E70/E80 Vision)



ERGOモード エステチカ E80 Vision -高度診療に対応-

シートの水平移動・スローモーション機能

水平方向と垂直方向にまっすぐに移動でき、また、スローモーション機能で患者さんの口腔位置をマイクロスコープの焦点と術野に容易に合わせることができます。

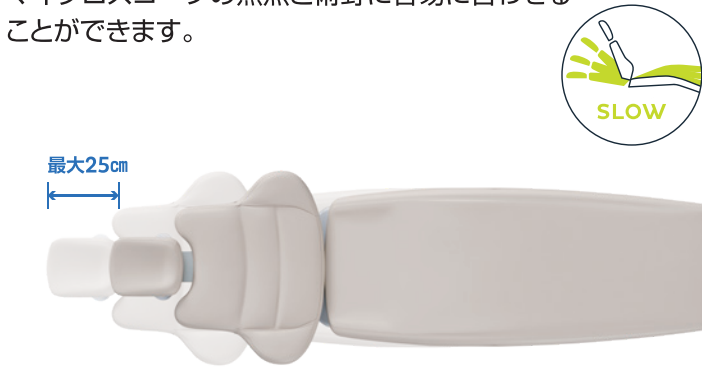

ドクターズツール フィジオ エボ

シート、座板、バックレストを個々に調節することができます。バックレストと座板は、人間工学に基づいた形状で、座板の中央の隆起部により安定して座れ、素早く動いたり止まったりする場合でも滑ることを防ぎます。

バックレストのスプリング力は、腰の筋肉、特に脊椎を持続的にサポートし、長期的な健康への配慮がされています。



KaVo uniQa

ハンドピースごとに保存されたメモリーを迅速かつ確実に呼び出すことができ、最大6名のユーザーのエア回路とモーター回路のメモリー登録が可能です。ハンドピースを取り出すだけであらゆる機能の情報が一目で確認でき、治療に集中できます。


KaVo ESTETICA KaVo uniQa

新型DVGWウォーターブロック

バイオフィルム対策の強化

新しいDVGWウォーターブロックは、タンク内の上部まで過酸化水素水で浸けることにより、タンク内全体でバイオフィルムを抑制する対策をしています。

KaVo DVGWウォーターブロックは、水が上から下に流れる仕組みにより、水道管への逆流を防ぎます。

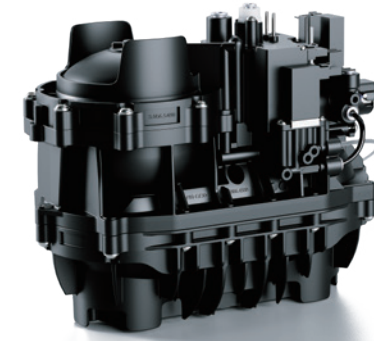

(プリムス1058 Lifeは従来のDVGWウォーターブロック)



ビルトイン・ハイジーンアダプター



(右)オキシゲナル 6をビルトイン (左)排水管のお手入れ: デカセプトルゲルを自動充填

DVGWウォーターブロック
DVGWウォーターブロックは、水消毒システムで使用する過酸化水素水を自動希釈するタンクです。ドイツDVGWのガイドラインに沿ったウォーターブロックです。
DVGW: ドイツガス水道協会 Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

バックレストと座板の自動調整 (トレンデレンブルグ機能)

バックレストの傾きにに合わせてフットレストが自動的に昇降し、患者さんは身体が圧迫されたり、引っ張られたりすることなく、スムーズにポジションの移動ができます。



チルト機能

水平モードの昇降操作により、シート後部を上下に動かし調整できるので、患者さんは長時間の治療時にも快適に座ることができます。



ドクターズツール フィジオ エボ

特別セットA E80 特別セットA E70

エステチカ E70/E80 Visionとフィジオ エボはAGR認定を受けています。

AGRマーク

背中にやさしい機器としてドイツ歯科業界で初めてAGRマークを取得しています。

当認定は独立した専門委員会がエルゴノミクスおよび健康に関して優れた製品に授与しています。

